

# QUICKIE®

Der führende Standard in der Positionierung

## Quickie Iris



### Die Intelligente Rotation innerhalb des Schwerpunktes

Die Sitzeinheit des Quickie Iris lässt sich bis zu 60° auf dem Rahmen kippen. Druckentlastung mit maximalem Komfort ist damit garantiert.


Mit der individuellen Sitzpositionierung bleibt der Schwerpunkt des Patienten im Zentrum. Das Fahrverhalten und das Handling werden einfacher und die Stabilität ist gewährleistet.

Sitz- und Rückenposition sind stufenlos und unabhängig voneinander verstellbar. Vielseitige Einsatzmöglichkeiten auch in Kombination mit Sitzschalen oder als Komfort-/Pflegerollstuhl. Eine kurze Rahmenkonstruktion kombiniert mit maximaler Stabilität, innovativem Design und Sitzbreitenverstellung von 35 cm bis 56 cm.

Der Quickie Iris, die intelligente Lösung in der Positionierung!



## Technische Daten

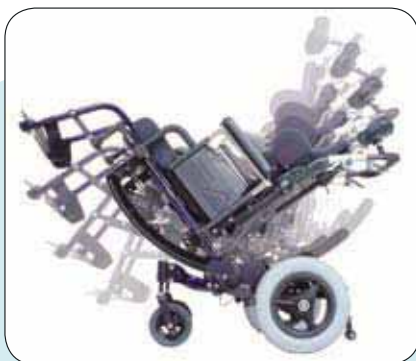





Einstellbarer Neigungsbereich  
Standard: -5° bis +5° / 0° bis +55° / 5° bis +60°  
Kurz: -5° bis +35° / 0° bis +40° / 5° bis +45°



Rückeneinheit einstellbar (Standard) oder Recline Rücken (Option)



Stoßbügel winkelverstellbar (Option)

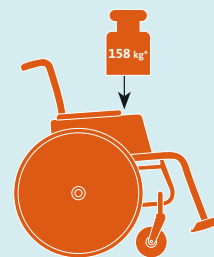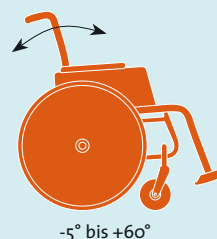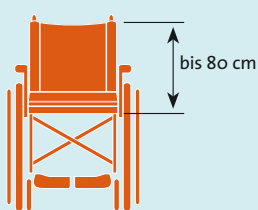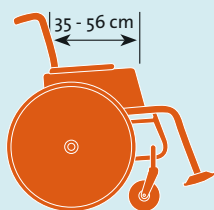

Gesamtbreite (abhängig von Radwahl, Option, etc.):	SB + ca. 18 cm	Gesamtgewicht:	ab 18 kg
Sitzbreite:	35 - 56 cm	Max. Zuladung:	113 kg / 158 kg*
Sitztiefe:	35 - 56 cm	Sitzhöhe hinten:	37 - 50 cm
Rückenhöhe:	bis 80 cm	Sitzhöhe vorne:	37 - 50 cm
Rückenwinkeleinstellung:	optional	Tarifposition Sozialversicherung:	560 000

\* Maximale Belastung bis 113 kg, verstärkte Ausführung bis 158 kg.

**STEPS**<sup>TM</sup>  
Sunrise Training and Education Programmes  
KNOWLEDGE FOR THE FUTURE



Sunrise Medical AG  
Lückhalde 14  
CH-3074 Muri  
Fon +41 (0)31 958 3838  
Fax +41 (0)31 958 3848  
E-Mail [info@sunrisemedical.ch](mailto:info@sunrisemedical.ch)  
Web [www.sunrisemedical.ch](http://www.sunrisemedical.ch)