



# BREEZY CIRRUS G5

MAXIMALER KOMFORT  
DURCH MAXIMALE  
EINSTELLBARKEIT



# UNZÄHLIGE MÖGLICHKEITEN – AUSGEZEICHNETER KOMFORT UND STABILITÄT

Bei der Entwicklung des Cirrus G5 wurde insbesondere Wert auf höchste Qualität der verwendeten Materialien sowie anwenderfreundliche, technische Lösungen gelegt.

Die Vielfalt an Optionen und Zubehör begünstigen unzählige Möglichkeiten der Positionierung und Anpassungen an den Nutzer. Der winkelverstellbare Schiebebügel, Gleitsitz oder die intuitive Steuerung der Sitz und Rücken- neigung entlasten zudem die Begleitperson und vermeiden Fehlbedienungen.

## EXZELLENTER KOMFORT UND STABILITÄT

Der Cirrus G5 kombiniert den hohen Komfort mit zahlreichen Anpassungsmöglichkeiten für die perfekte Positionierung des Nutzers über den ganzen Tag. Beispielsweise hat der Cirrus G5 eine mitlaufende Armlehne, welche die bestmögliche Unterstützung und die optimale Positionierung auch bei Rückneigung ermöglicht.

Die optimalen Druckentlastungspositionen können ohne Transfer, während der Nutzer sich im Rollstuhl befindet über die durch Gassfedern geführte Rücken sowie Sitzneigung mehrmals am Tag durchgeführt werden. Die Sitz und Rücken- neigung ist optional auch elektrisch verfügbar.

Häufige Positionswechsel tragen zur optimalen Druckentlastung bei. Die Sitzplatte mit Beckenaussparung erlaubt eine zusätzliche Druckentlastung der prägnanten Stellen des Gesässes.

## EINSTELLUNGEN LEICHT GEMACHT!



Leichtes Verstellen des Gleitsitzes ohne grossen Kraftaufwand für einen sicheren und einfachen Transfer in und aus dem Rollstuhl.



Durch die angebrachte Scala ist ein individuelles Einstellen des Rollstuhls auf den Nutzer einfach und schnell möglich.



Die leichtgängigen farbig abgesetzten Griffe vereinfachen die Anpassung zusätzlich.

### ARMLEHNE

Die Armlehnen folgen dem Neigungswinkel des Rückens, um in jeder Position die bestmögliche Unterstützung zu bieten. Durch das Hochklappen und Abnehmen der Armlehnen ist ein leichter Transfer möglich.

### RÜCKENLEHNE

Die Rückenlehne kann durch verschiedenste Einstellungen perfekt auf die Bedürfnisse des Nutzers angepasst werden. Das extra weiche Rückenkissen sorgt für optimalen Komfort.

### KOPFSTÜTZEN OPTIONEN

Die zahlreichen Gurte und Verstellungsmöglichkeiten der optionalen Kopf- und Nackenstütze, ermöglicht optimalen Komfort.

### SCHIEBEGRIFF

Der ergonomische und höhenstellbare Schiebebügel ist bei allen Modellen Standard.

### SITZNEIGUNG

Die doppelte Anbindung sorgt für ein komfortables und sicheres Verstellen bis zu einer Sitzneigung von 33°. In Verbindung mit dem bis zu 35° winkelverstellbarem Rücken sind verschiedenste Sitzpositionen möglich welche für die optimale Druckentlastung unerlässlich sind.

### FUSSRASTEN

Das Sitzschalenuntergestell vom Cirrus G5 ist mit hochschwenk-, abschwenk- sowie abnehmbaren Fussrasten ausgestattet. Bei der Winkelveränderung der Beinstützen findet ein Beinlängenausgleich statt. Der Fussbrettwinkel kann mit optionalem Klinik-Kit ohne Werkzeug verstellt werden.

## CIRRUS G5 SITZSCHALENUNTERGESTELL


Die zahlreichen Optionen des Cirrus G5 Sitzschalenuntergestell vereinfachen die individuelle Anpassung an die sich verändernden Bedürfnisse des Nutzers.

Das neue Sitzschalenuntergestell lässt in puncto Positionierung keine Wünsche offen. Die bereits in der Standardversion enthaltene Sitzneigung von 33° und Rücken- neigung von 35° beugen durch optimale Durchblutung sowie Druckentlastung des Gesässes Schädigungen der Haut vor.



### CRASH GETESTETER TRAPEZ ADAPTER

Der Trapezadapter stellt die Verbindung zwischen dem Sitzschalenuntergestell und der Sitzschale des Nutzers her. Der doppelte Schliessmechanismus sorgt für mehr Sicherheit und Stabilität bei den Herausforderungen des Alltags vor allem im Auto.

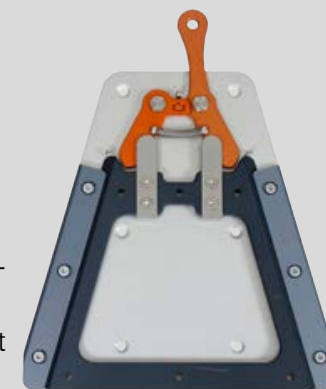



# TECHNISCHE DATEN

## BREEZY CIRRUS G5

Sitzbreite (mm)	390, 420, 450, 480, 510, 540	Sitzneigung	0° - 33°
Sitztiefe (mm)	390 - 550	Armlehnenhöhe (mm)	220 - 330
Sitzhöhe (mm, ohne Sitzkissen)	380 - 550	Gesamtbreite (mm)	Sitzbreite + 220 mm (+ 240 mm mit Trommelbremse)
Rückenhöhe (mm)	550 / 650	Gewicht	ab 48 kg
Rückenwinkel	0° - 35°	Max. Zuladung	135 kg



### Sunrise Medical AG

Erlenauweg 17  
 3110 Münsingen  
 Fon: 031 958 3838  
[info@sunrisemedical.ch](mailto:info@sunrisemedical.ch)  
[www.SunriseMedical.ch](http://www.SunriseMedical.ch)



Für weitere Informationen beachten Sie bitte unsere Bestellformulare oder kontaktieren Sie unseren Kundendienst.

Technische Änderungen, Anpassungen und Druckfehler vorbehalten.