

Q700 M HD «Heavy Duty»



Ziel

Komplettiert die Familie der Q-Serie

- Integration eines «Heavy Duty» Sitzsystems in die E-Rollstuhl-Linie für Erwachsene.
- Integration von Optionen und Zubehör der Q-Serie.



Q700 M HD Antriebseinheit

- Ausgestattet mit neuen, hocheffizienten 4-Pol Performance Motoren. Spitzenleistung von 830 W.
- Durch die hohe Effizienz der Motoren, wird nur ein 90 A Steuergerät benötigt, um die beste Performance zu erzielen.
- Kantensteigfähigkeit von 70 mm
- 8 Farbakzente
- Optionales LED Licht auf der Radabdeckung (nur Licht und anstelle LED Licht und Blinker)



Q700 M HD Antriebseinheit

- Benutzer ist über der Mitte der Antriebseinheit positioniert.
- Dreht dahin wo der Joystick ausgelenkt wird.
- Intuitives Fahren für Beginner.
- Effizientes Fahren. Benötigt weniger Energie, um den Stuhl zu drehen.



Q700 M HD Sitzsystem

- Elektrische Sitzverstellungen limitieren das max. Benutzergewicht nicht.
- Gleiche Sitz-Technologie wie beim Sedeo Pro
- Mehrfach einstellbar
- 2 überlappende, verstärkte Stahl-Sitzplatten
- Stufenlose Sitzbreiten- und Sitztiefeinstellung
- Sitzbreite: 500–660 mm
- Sitztiefe: 460–560 mm
- Jay J3 Rücken und Jay Kissen auf dem Stuhl bestellbar
- Optionaler Rücken nach vorne abklappbar mit Schnellverschluss



Q700 M HD Sitzsystem

Auswahl aller elektrischen Sitzverstellungen – ausser Sitzlift

- Sitzneigung, elektrisch verstellbar, 0 bis 30°
- Sitzneigung, elektrisch verstellbar, -5 bis 25°
- Sitzneigung, elektrisch verstellbar, 0 bis 50°
- Sitzneigung, elektrisch verstellbar, - 5 bis 45°

- Rückenwinkelverstellung «Heavy Duty», elektrisch, 90 bis 130°

- Elektrische Zentralfussraste, 90 bis 180°

- Elektrische Fussrasten, abschwenkbar, hochschwenkbar



Q700 M HD Sitzsystem

Neue mehrfach einstellbare Armauflage




- Einstellbare Gelenke für optimale Armposition
- Breiteneinstellung der Armauflagen

Q700 M HD Sitzsystem


Neue mehrfach einstellbare Armauflage

- Armpolster stufenlos winkel- und tiefeinstellbar

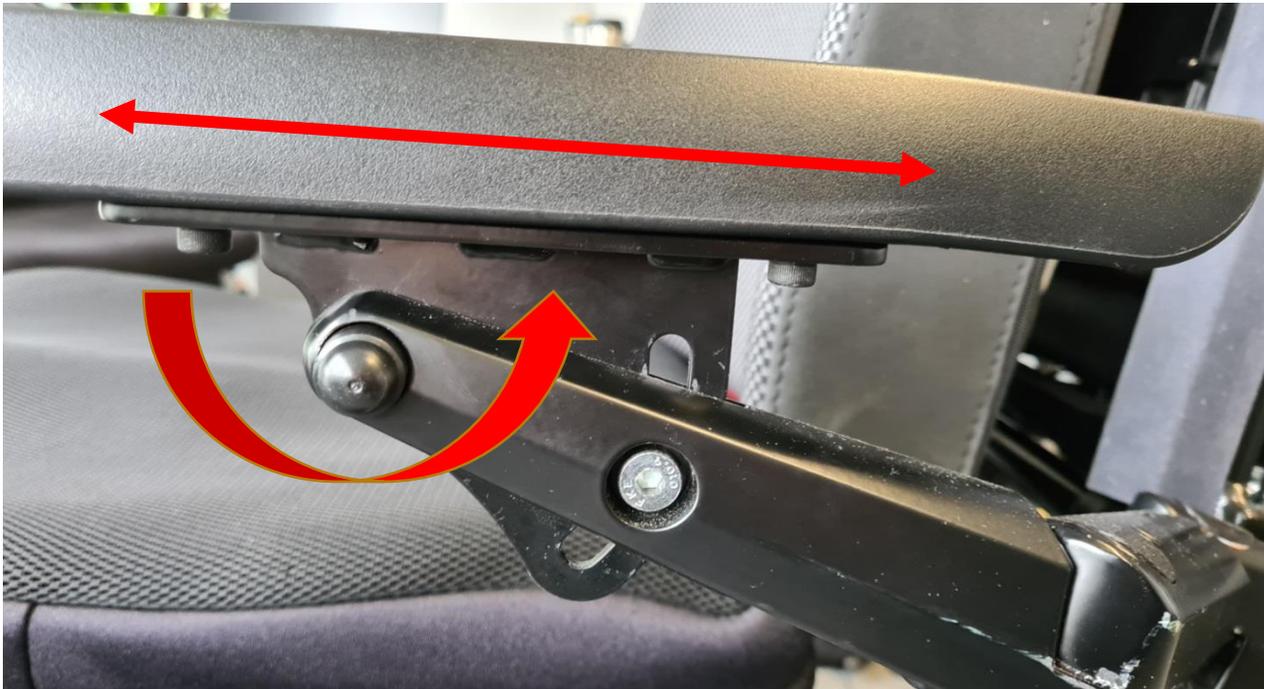

Q700 M HD Sitzsystem

Neue mehrfach einstellbare Armauflage

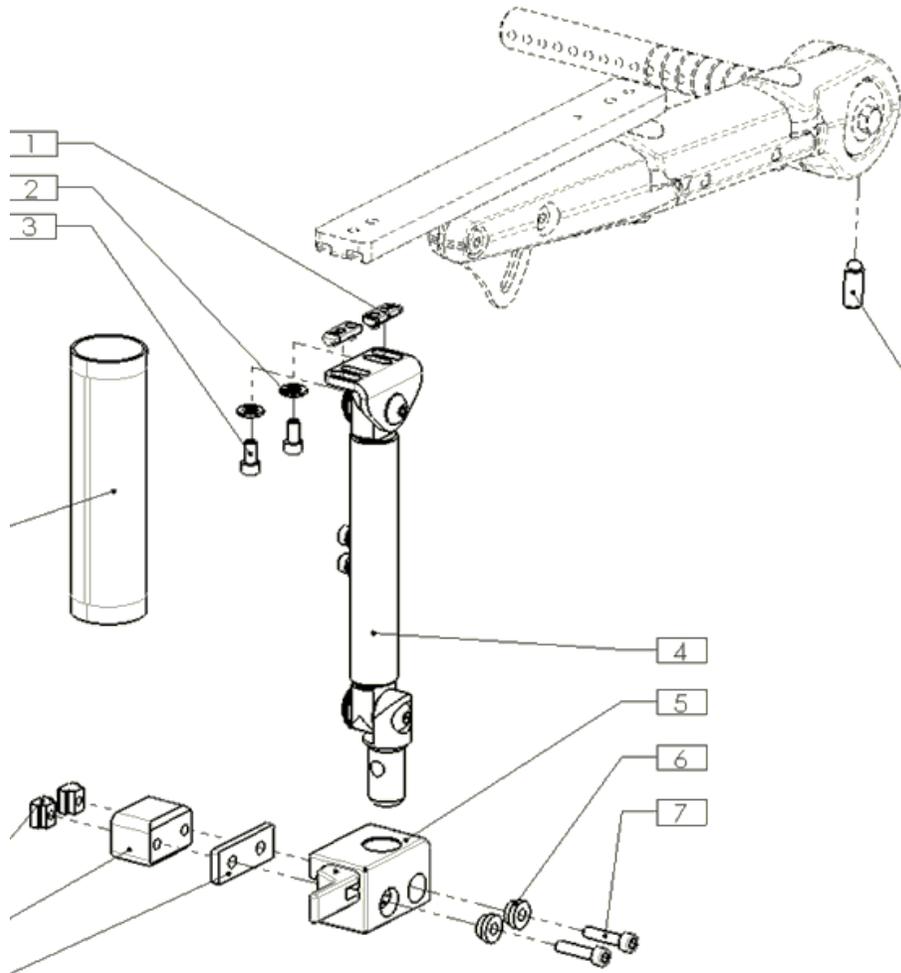

- Zusätzliche Abstützung vorne. Verhindert das nach unten drücken der Armauflagen bei hoher Belastung (z. B. Transfer in und aus dem Stuhl).

Q700 M HD Sitzsystem

- Grosse Auswahl an unterschiedlichen Armpolster, für die Bedürfnisse und den Komfort des Benutzers.
- SEDEO Kopfstützen
- WHITMYER Kopfstützen
- Sämtliche Sondersteuerung sind verfügbar