

improving people's lives

Sunrise Medical AG

JAY J3 Kissen

Das Beste noch ein Stück besser!





JAY J3 Sitzkissen





JAY J3 Sitzkissen



JAY J3™ Kissen



Das J3 Kissen verfügt über hervorragende Eigenschaften in den Bereichen Druckentlastung, Oberflächen-Spannungsreduktion, Wärme- und Feuchtigkeitsausgleich, optimale Stabilität und Positionierung. Dies alles vereint in einem Produkt, welches einfach bestell- und optimal den individuellen Bedürfnissen anpassbar ist.




Schlüssel-Verkaufsargumente




- 1 ***Einzigartiges Argument: JAY Optiwell™ Beckenaussparung***
 - Optimale Passform durch individuelle Beckenaussparung (PLA)
- 2 ***Einzigartiges Argument: Fluid und Luft Technologie***
 - Fluid Technologie, Standard oder individuell anpassbar
 - Luft Technologie, 1- oder 2-Kammersystem (1 oder 2 Ventile)
- 3 **Kundenspezifische Optionen**
 - Sitzbezugsoptionen
 - Positionierungs-Zubehör
 - Standard und individuell festlegbare Modifikationen
- 4 **Einfachheit des Bestellvorgangs**
 - Einfacher, intelligenter, individuell zusammengesetzter Bestellcode (SMART Part #)



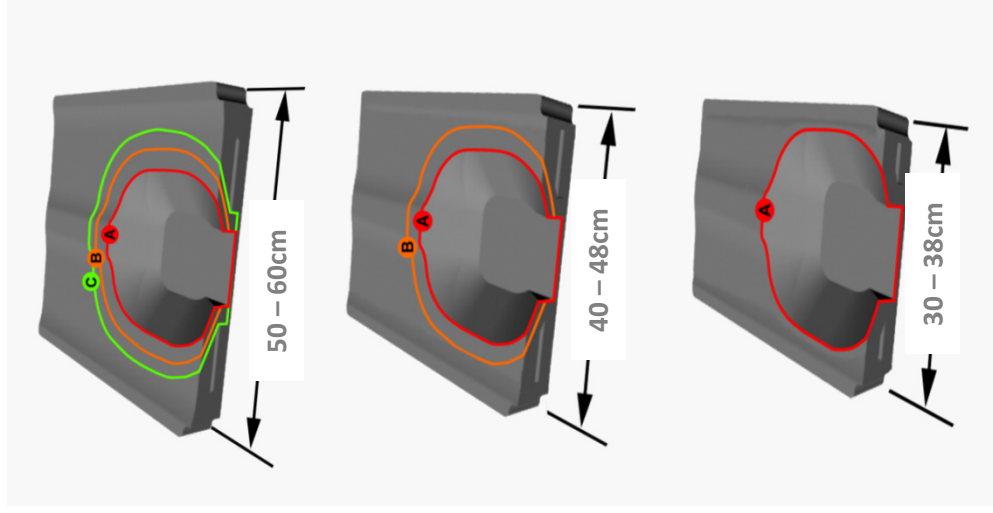


Individuelle Beckenaussparung für optimale Passform

- Stellt gewünschte klinische Zielsetzungen im Bereich Druckentlastung und laterale Stabilität konsistent, einfach und vor Ort (beim Händler) sicher
- Die Beckenaussparungs-Grösse ist innerhalb der Grössenversionen A, B und C unabhängig von der Kissengrösse
- Wenn Bedürfnis für Variation der PLA-Grösse nach dem Kauf besteht, kann die Beckenaussparung durch PLA-Reduktionsringen verändert werden

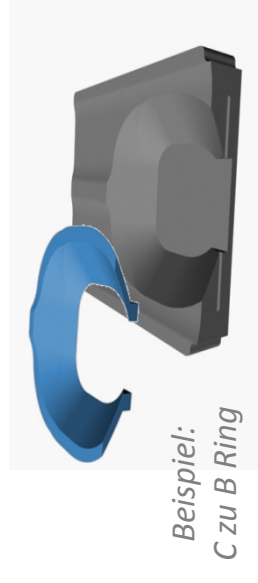

Optimierung der Füllstände sowie wechselnden Bedürfnissen entsprechen

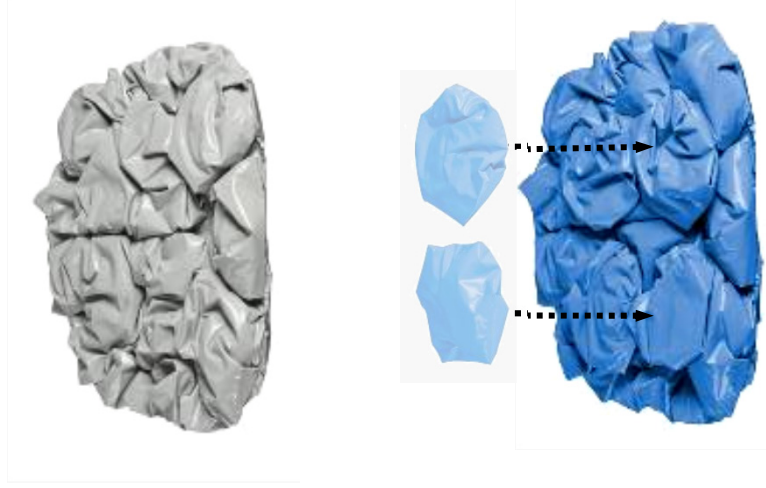

- **Standard (FF)**

- Standard Fluid Auflage, die nicht vor Ort (beim Händler) angepasst werden kann
- Option für Bestellung mit unterschiedlichen Füllständen (Unterfüllung, Überfüllung, asymmetrische Füllung)

- **Individuell anpassbar (FV)**

- Einzigartige Eigenschaft zur individuellen Optimierung der Füllstände mittels zusätzlichen Fluid Pads (Standardlieferung mit 2 Pads)
- Vor Ort anpassbar – zusätzliche Auflagen (Pads) können direkt bei oder nach der Kissenbestellung geliefert werden

Die Verwendung der ROHO® Dry Flotation® Technologie kombiniert mit den Vorteilen der Jay® J3 Basis bietet eine zusätzliche Alternative für optimale Dekubitus-prophylaxe

• 1-Kammersystem, 1 Ventil (AS)



- Möglichkeit zur individuellen Anpassung und Optimierung der Luftmenge in der Kissenauflage, um eine stabile und symmetrische Position des Beckens zu ermöglichen

• 2-Kammersystem, 2 Ventile (AD)



- Möglichkeit zur individuellen Anpassung und Optimierung der Luftmenge in den **separaten Luftkammern** der Kissenauflage (z.B. Korrektur einer schiefen Beckenposition)
- Wechselnden Bedürfnissen entsprechen
- Optimierung der Druckpunkte ohne Stabilität und Positionierung zu beeinflussen



Microklima- oder Inkontinenz-Kissenbezugsoption

- Netzartige Foameinlage erhöht Sitztoleranz und -komfort
- Zum Patent angemeldetes Übergrößen-Bezugsmaterial wird beim Einnähen in den Bezug komprimiert und reduziert somit bei Belastung die Oberflächenspannung
- Mikroklimatisches 3DX™ Gewebe (Abstandsgewirke) führt zu Wärme- und Feuchtigkeitsausgleich
- Bei Inkontinenz ist optional ein Inkontinenzbezug erhältlich



Positionierungs-Zubehör

Sicheres Anbringen der Zubehörteile durch Anpressdruck-Haftklebeband (PSA – Pressure Sensitive Adhesive)


Lateraler Beckensupport

Medialer Oberschenkel-support

Lateraler Oberschenkel-support



Universalbezug auch für alle Positionierungskomponenten geeignet

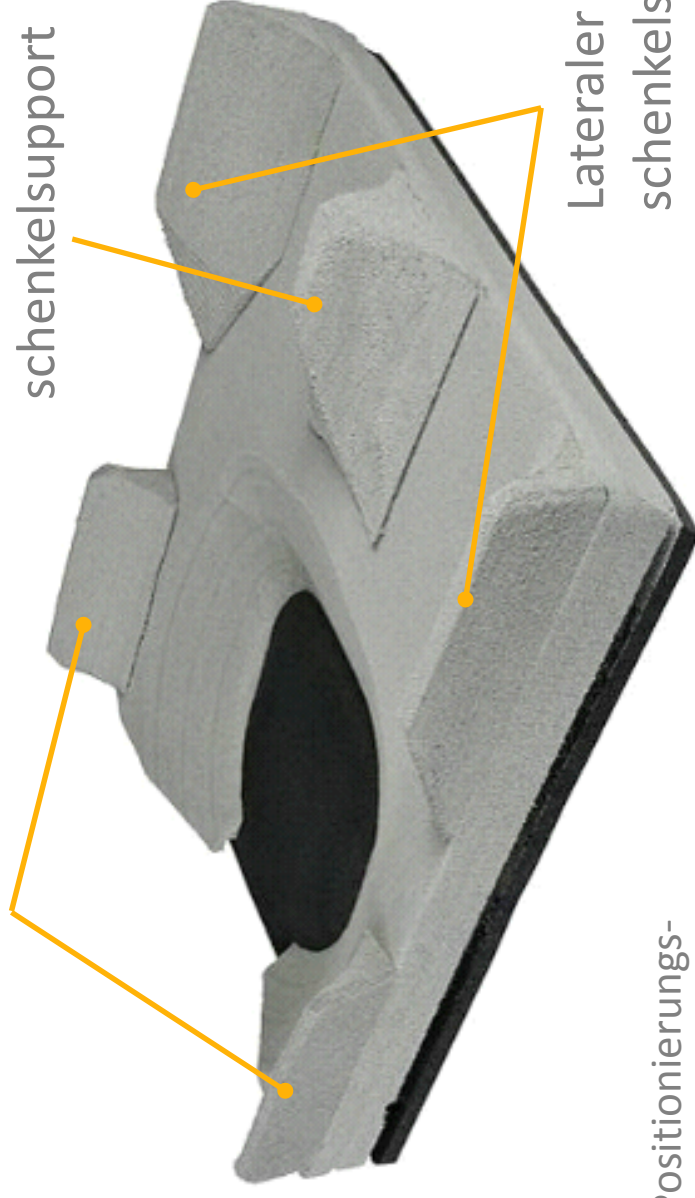

Standard und individuell festlegbare Modifikationen


Wie beim J2 und J2 Deep Contour bietet das J3 Kissen eine Vielzahl von Anpassungsmöglichkeiten ohne Zusatzkosten, wie beispielsweise:

- Zugschnitt auf Beinlängen – für unterschiedliche Beinlängen
- Kerbung für Rückenrohre – zur hinteren Stabilisierung
- Winkelkeil – Zusatzmaterial, um einen hinteren/vorderen Winkel zu ermöglichen
- Kontraktur-Schnitt bis zu 45°

...nur um einige der möglichen Modifikationen zu nennen.



Kontraktur-
Schnitt
(Standard)

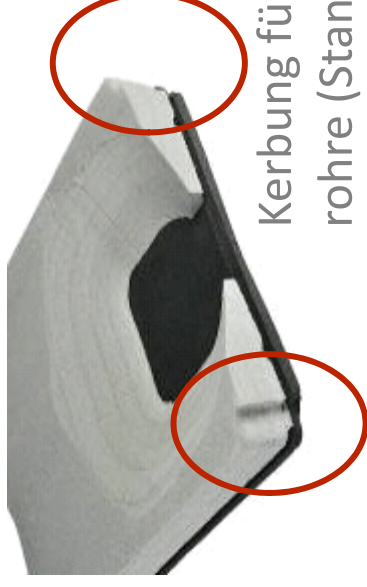

Kerbung für Rücken-
rohre (Standard)

Einfachheit des Bestellvorgangs



Bestellcode (SMART Part #)

- Einem 6-Schritte-Prozess folgend, entsteht ein individueller J3 Kissen Bestellcode (SMART Part #)

Beispiel:



- Schritt 1: Kissenhöhe (Standard oder Tief)
- Schritt 2: Sitzbreite und -tiefe (in cm)
- Schritt 3: Grösse der Beckenaussparung (PLA), Grössen **A, B, C**
- Schritt 4: Fluid Technologie (Standard **{FF}** oder individuell anpassbar **{FV}**)
Luft Technologie (1- **{AS}** oder 2-Kammersystem **{AD}**)
- Schritt 5: Kissenbezug (Inkontinenz, **Microklima**)
- Schritt 6: Zubehör / Positionierungskomponenten (**P**) - optional



*Zusätzliche Informationen finden Sie in unserer
J3 Kissen Bedienungsanleitung*



Eine exzellente Lösung für unsere Kunden:

- Hohes bis extrem hohes Dekubitusrisiko, kann evtl. selber keine Repositionierung oder Druckentlastung vornehmen
 - Hohes Risiko → Standard Jay 3
 - Extrem hohes Risiko → Tiefes Jay 3
- Benötigt laterale und vorwärts/rückwärts gerichtete Stabilität
- Moderate bis hohe Positionierungsbedürfnisse
- Benötigt Anpassungen über die Zeit



Technische Daten



Gewicht	J3 Standard Fluid:	ab 2.0 kg
	J3 Standard Luft:	ab 1.4 kg
Kissenbreite	30 – 60 cm (in 2 cm Schritten)	
Kissentiefe	30 – 60 cm (in 2 cm Schritten)	
Kissenhöhe	Standard:	9.5 cm (ohne Füllung)
	Tief:	11 cm (ohne Füllung)
Benutzergewicht	30 – 50 cm:	max. 150 kg
	56 – 60 cm:	max. 227 kg
Bezugsoptionen	Microklimatisches 3DX™ Gewebe (Abstandsgewirke) Inkontinenzbezug	







Sunrise Medical AG

Lückhalde 14

3074 Muri

Fon 031 958 3838

Fax 031 958 3848

info@sunrisemedical.ch

www.sunrisemedical.com



www.jay-seating.com

