

### Sopur Easy<sup>max</sup>




Farbe: Schwarz

#### Das Maximum ist gerade gut genug!

Der Easy<sup>max</sup> ist ein Adaptivrollstuhl, der es in Punkto Stabilität und Fahreigenschaften mit jedem Starrrahmenrollstuhl aufnehmen kann. Die innenliegende Kreuzstrebe gewährleistet ein einfaches Handling und ermöglicht ein sehr kompaktes Faltmass.

Der Easy<sup>max</sup> überzeugt auch durch interessante Detaillösungen. So sind z.B. die Verstellmechanismen der Lenkradaufnahme im Rohr integriert. Der 4 cm höhere Rahmen und die nach innen gebogene Rahmenführung erlauben eine optimale Justierung der Beine. Der abgerundete Rahmen in Verbindung mit der flach geformten Radabdeckung kommt völlig ohne Kanten aus und bietet somit einen hohen Komfort beim Aus- und Einsteigen bzw. Einladen des Easy<sup>max</sup>.



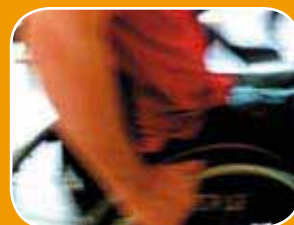

## Technische Daten







Innenliegende Kreuzstrebe



Leichtgewichts-Fussraste mit Seitenschutz



Fest winkeleinstellbarer Rücken  
-9° bis +9° in 3° Schritten

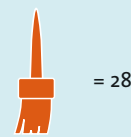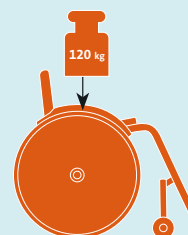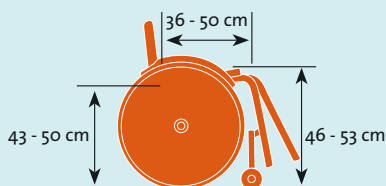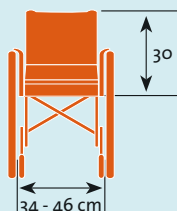

|                                                    |                        |
|----------------------------------------------------|------------------------|
| Gesamtbreite (abhängig von Radwahl, Option, etc.): | SB + ca. 16cm          |
| Sitzbreite:                                        | 34 - 46 cm             |
| Sitztiefe:                                         | 36 - 50 cm             |
| Rückenhöhe:                                        | 30 - 45 cm             |
| Rückenwinkel:                                      | -9° bis +9° (optional) |

|                  |            |
|------------------|------------|
| Gesamtgewicht:   | ab 10.9 kg |
| Max. Zuladung:   | 120 kg     |
| Sitzhöhe hinten: | 43 - 50 cm |
| Sitzhöhe vorne:  | 46 - 53 cm |



Sunrise Medical AG  
Erlenauweg 17  
CH-3110 Münsingen  
Fon +41 (0)31 958 3838

E-Mail [info@sunrisemedical.ch](mailto:info@sunrisemedical.ch)  
Web [www.sunrisemedical.ch](http://www.sunrisemedical.ch)