

XFamily²

Generation² – Funktionalität und Design



Breezy ein sicherer Wert!

Die Breezy X-Family²: Effizienz, die sich bezahlt macht.



Die Breezy Modelle:

Die zuverlässigen Hilfsmittel für Ihre Selbstständigkeit.

Robustes Material, sicheres Fahren in jedem Gelände und ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis.

Die verbesserten Funktionalitäten erlauben eine optimale und wunschgerechte Positionierung.




Die Breezy XFamily²!

Optimierter Einsatzbereich.

Sechs Rollstühle – Ein Konzept. In kürzester Zeit tauschen Sie Teile unter den Modellen und führen individuelle Anpassungen durch.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Durchdachtes und komplexes System – Modular und leicht konfigurierbar. Bestens geeignet für den individuellen Einsatz.
- Gleichteile, welche die Lagerbewirtschaftung erleichtern.
- Der flexible Einsatz auch innerhalb der Vermietung und in Kliniken.
- Leichte Re-Konfigurierung, die Anpassung und Nachrüstung kann nicht einfacher sein.
- Niedrige Lagerbestände – minimale Bindung der Ressourcen.
- Einfache Logistik – schnelle Reaktionsfähigkeit.

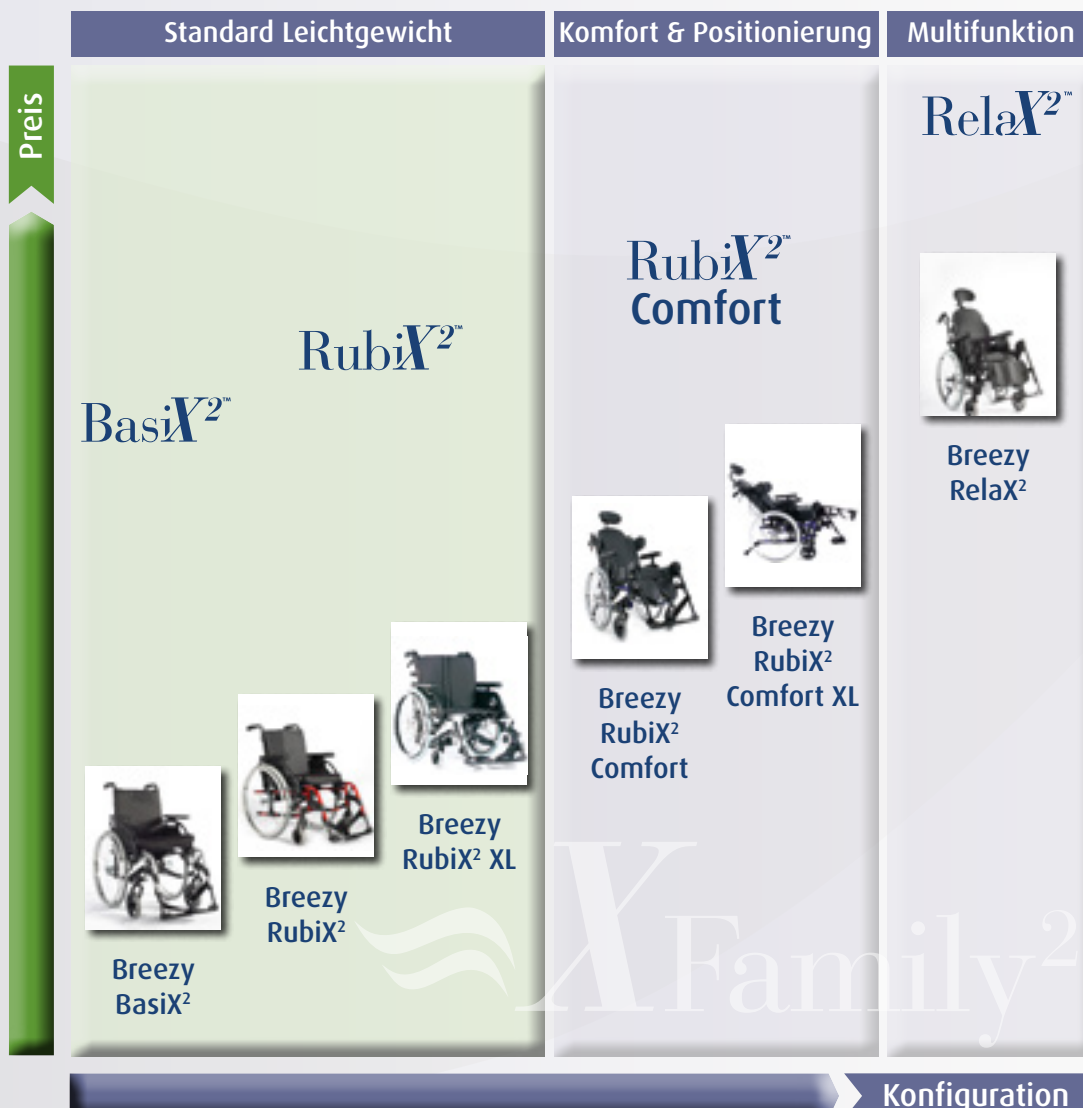

Maximale Nutzung von Gleichteilen für die optimale Wirtschaftlichkeit und perfektes Management der Modelle.

Überraschend einfach und doch so genial: Das Breezy XFamily² Mini-Max-Prinzip. Das hohe Niveau an gemeinsamen Teilen bedeutet, dass Sie weniger Lagerteile benötigen und dennoch eine hohe Flexibilität gewährt bleibt.

	Breezy BasiX ²	Breezy RubiX ²	Breezy RubiX ² XL
Fussstützen	●	●	●
Fussstützen hochschwenkbar	●	●	●
Stumpfauflage	●	●	●
Armauflagen	●	●	●
Seitenteile höhenverstellbar doppelt abgestützte Version	●	●	●
Seitenteile höhenverstellbar einfach abgestützte Version	●	●	●
Feststellbremsen	●	●	●
Bremshebelverlängerung	●	●	●
6" / 8" Lenkräder	●	●	●
22" / 24" Antriebsräder	●	●	●
22" / 24" Trommelbrems-Räder	●	●	●
BasiX Sitzbespannung	●	●	●
Sicherheitsrad	●	●	●
Beckengurt	●	●	●

- Minimaler Handhabungsaufwand, maximale Austauschbarkeit.
- Minimale Lagerhaltung bei Ersatzteilen, maximale Individualität.
- Minimale Bestellformalitäten, maximale Wirtschaftlichkeit.

Das Breezy XFamily² Mini-Max Prinzip überzeugt nicht nur wegen des Designs der Produkte, sondern bietet Ihnen eine neue Dimension der Flexibilität.

Ihre Lagerbestände richten sich nach Ihren Bedürfnissen und die Gesamt- und Folgekosten können über den gesamten Lebenszyklus der Produkte tief gehalten werden.

	Breezy RubiX ² Comfort	Breezy RubiX ² Comfort XL	Breezy RelaX ²
	●	●	●
	●	●	●
	●	●	●
	●	●	-
	●	●	-
	●	●	●
	●	●	-
	●	●	-
	●	●	●
	●	●	●
	●	●	●
	●	●	-
	●	●	●
	●	●	●

X Family²





BasiX²

Verbessert in Stabilität und Einstellbarkeit. Modernes Aussehen und einfache Handhabung.



Neuer Rahmen in der BasiX-Ausführung. Erweiterte Verstellmöglichkeiten und Sitztiefenanpassung von 41 bis 46 cm.

Velcro anpassbare Rückenbespannung.

Neue robuste Lenkradbefestigung. Bietet mehr Stabilität und ist winkel Anpassbar nach Sitzhöhenänderungen.

RubiX²[™]

Breites Spektrum an klinischen Optionen. Auch für die Hemiplegiker-Versorgung bestens geeignet.

Unter anderem ein winkeleinstellbarer Rücken oder Recline-Funktion als Option wählbar.



Robuste 3-Arm-Kreuzstrebe für eine lange Einsatzdauer.



Komfortsitz und Recline-Rücken (optional). Auch für längeres Sitzen bestens geeignet.



Velcro anpassbare Rückenbespannung.



RubiX² XL

Der RubiX² XL erweitert das Einsatzgebiet. Auch für schwerere Patienten mit bis zu 170 kg und einer Sitzbreite bis 60 cm.



Neue robuste Lenkradbefestigung. Bietet mehr Stabilität und ist winkelangepasst nach Sitzhöhenänderungen.



Robuste 4-Arm-Kreuzstrebe bei der XL Version bis 170 kg Nutzergewicht.



Trommelbrems-Antriebsrad als Option.

 XFamily²





Relax²[™]

Starke Optik,
hervorragender Komfort
und Multifunktionalität.
Mit vielfältigen Optionen
für die perfekte Mobilität.



Stufenlos verstellbarer Rückenwinkel
für die optimale Positionierung.
Rückenwinkel von 0° bis 35°.
Kippsitz von -3° bis 25°.



Stufenlos verstellbare Sitztiefe.
Einstellbar von 42 bis 50 cm.



Neu konzipierte Fusstütze höhenverstellbar.
Verbesserte Funktion in ansprechendem Design.

Zubehör und Sitzen

Die XFamily² bietet serienmässig eine breite Palette an Optionen, Einstellungen und Anpassmöglichkeiten.



Stossgriffe höhenverstellbar.



RubiX Recline-Rücken (stufenlos bis 30°).



Fussauflage winkelverstellbar.



Sicherheitsrad schwenk- und anpassbar.




Trommelbremse für Begleitpersonen.



Höhenverstellbares Seitenteil mit Armauflage lang oder kurz, variabel anpassbar.



Fussstützen höhenverstellbar.

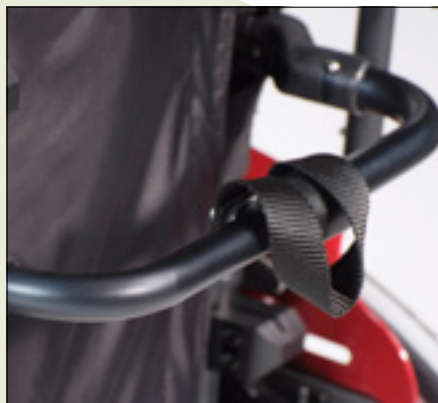

Rücken-Stabilisationsbügel mitfaltend.



Stumpfaulage.




Die XFamily² lässt Ihnen die Wahl, den nötigen Komfort nach Ihren individuellen Bedürfnisse zu bestimmen. Wählen Sie aus unserer Jay-Palette die richtigen Kombinationen.



Das Jay Basic Sitzkissen ist für Kunden geeignet, welche Sitzkomfort, eine leichte Sitzführung und geringen Dekubituschutz benötigen.



Das Jay Soft Combi P ist für Kunden, die eine leichte Sitzführung/Unterstützung und wenig Dekubituschutz benötigen. Stabilisiert das Sitzen in der Kontur der Basisschale und vermeidet ein Vor- und Zurückrutschen.

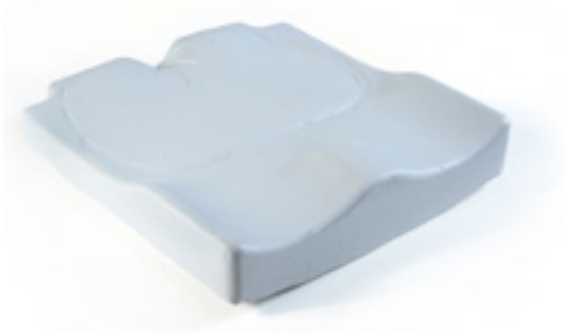

Das Jay Easy Visco ist ein leichtes Sitzkissen für hohen Sitzkomfort und für gute Sitzstabilität. Geeignet für leichten bis mittleren Dekubituschutz.



Flache Kontur (SC) Mittlere Kontur (MC) Tiefe Kontur (DC) Tiefe Kontur im Beckenbereich (PDC)


Der Jay 3 Rücken ist für alle Kunden, die eine leichte bis starke laterale und postulare Stabilität benötigen. Breites Spektrum an Möglichkeiten für die klinisch sinnvolle bis nötige Positionierung.

Einfache Verstellbarkeit in Tiefe, Höhe, Winkel und Rollstuhlsitzbreite. Gewährleistet eine rasche Positionierung und Anpassung an die Bedürfnisse des Rollstuhlnutzers.

Die Breezy XFamily²!

In jedem Fall das richtige Produkt!



	Breezy BasiX ²	Breezy RubiX ²
Sitzbreite	38 bis 52 cm	38 bis 52 cm
Sitztiefe	43.5 cm (41 bis 46 cm einstellbar)	41 bis 51 cm
Sitzhöhe	42.5 bis 51 cm	37.5 bis 53 cm
Sitzneigung	0° bis 6°	0° bis 6°
Rückenhöhe	43.5 cm (41 bis 46 cm einstellbar)	43.5 cm (41 bis 46 cm einstellbar)
Rückenwinkel	12° Lumbalknick	12° (-5° bis 20° bei Rücken winkelverstellbar)
Rückenbespannung <small>anpassbar</small>	Ja	Ja
Schwerpunkteinstellung	5 cm bis -5 cm	5 cm bis -5 cm
Seitenteile mit Armauflage	Höhenverstellbar, kurz oder lang	Höhenverstellbar, kurz oder lang, variabel
Farben	Brillant Silber	Brillantsilber, blau, Brillantrot
Gewicht	ab 14.9 kg	ab 15.5 kg
Maximales Nutzergewicht	125 kg	125 kg



Breezy RubiX² XL	Breezy RubiX² Comfort / Comfort XL	Breezy Relax²
52 bis 60 cm	38 bis 52 cm (52 bis 60 cm XL-Version)	41 (37 - 43), 46 (42 - 48), 51 (47 - 53). XL-Version (53)
41 bis 51 cm	41 bis 48.5 cm	42 bis 50 cm (stufenlos)
37.5 bis 51 cm	37.5 bis 53 cm (37.5 - 51 cm XL-Version)	42.5 bis 50 cm
0° bis 6°	0° bis 6°	0° bis 25° Werkseinstellung / -3° bis 22°
43.5 cm (41 bis 46 cm einstellbar)	46 cm	55 bis 60 cm
12° (-5° bis 20° bei Rücken winkelverstellbar)	7° bis 30° einstellbar	0° bis 35° (stufenlos)
Ja	Ja (Komfort Rücken optional)	-
5 cm bis -5 cm	5 cm bis -5 cm	-
Höhenverstellbar, kurz oder lang, variabel	Höhenverstellbar, kurz oder lang, variabel	Höhen-/tiefeinstellbar, variabel
Brillantsilber, blau, Brillantrot	Brillantsilber, blau, Brillantrot	Brillantsilber
ab 16.8 kg	ab 15.5 kg / XL-Version ab 16.8 kg	ab 34 kg
170 kg	125 kg / XL-Version 170 kg	145 kg / XL-Version 170 kg



 **Breezy**[®]
Premium products. Quality service.

Alle Produkte der Breezy XFamily²
sind Crash-getestet nach ISO 7176-19.



Sunrise Medical AG

Erlenauweg 17
3110 Münsingen
Fon: 031 958 3838
info@sunrisemedical.ch
www.SunriseMedical.ch