




EXTRA POWER FÜR IHREN ROLLSTUHL.

HIGH
PERFORMANCE

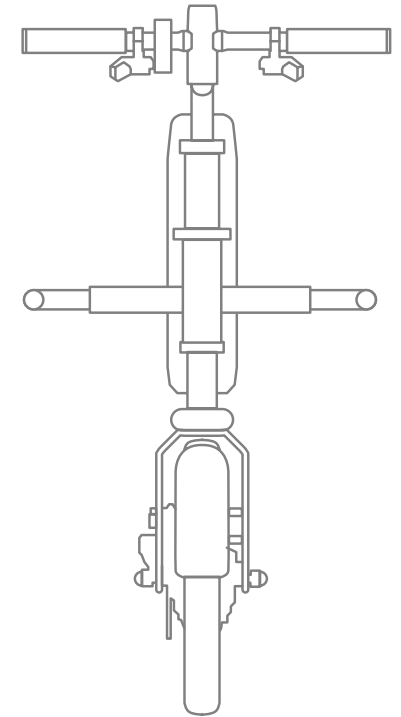

NEUE WEGE ENTDECKEN...

IHR PERFEKTER BEGLEITER, EGAL OB AUF DEM LAND ODER IN DER STADT.



...UND ORTE ERREICHEN, DIE BIS JETZT UNERREICHBAR WAREN.

Der F55 ist das neueste Mitglied unserer Elektromobilitätsfamilie. Entwickelt für einen unbekümmerten und unabhängigen Alltag, erweitert der F55 Ihre persönliche Reichweite. Dabei sparen Sie nicht nur Kraft, sondern schonen auch noch Ihre Arm- und Schultergelenke.

Ultrakompakt und schnell an- und abzudocken, ist der F55 immer bereit wenn Sie ihn brauchen. Verzichten Sie auf Ihr Auto und erleben Sie den Fahrspass, den der F55 bietet.



ECHTER FAHR- SPASS...



**HAVE
FUN**

...AUF JEDEM IHRER WEGE.

Das Leben in der Stadt ist dynamisch und lebendig. Bleiben Sie flexibel und mobil. Enge Aufzüge oder schmale Korridore im Supermarkt? Keine grosse Sache, dank des super kleinen Wendekreises und des Rückwärtsgangs.

Aktivieren Sie den Tempomat beim entspannten Dahinrollen und der F55 hält automatisch die Geschwindigkeit. Und wenn es mal später wird, schalten Sie einfach das integrierte LED-Licht ein.

Mit dem F55 können Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren: Ihre Freunde im Café treffen oder einfach Ihr Leben geniessen.



MOBILITÄT WAR NOCH NIE LEICHTER.

Mit dem leistungsstarken Motor und der exzellenten Traktion bewältigen Sie jedes Gelände.



**NO
LIMITS**

LITHIUM-IONEN AKKU

36 V und 8,1 Ah Kapazität für eine Reichweite bis zu 25 km. Ein intelligentes Batteriemanagementsystem erhöht die Lebensdauer.

DISPLAY

Volle Kontrolle mit dem einfach abzulesenden Display: Geschwindigkeit, Fahrstrecke, Gesamtstrecke, Batteriezustand und Stromverbrauch werden übersichtlich angezeigt.

TRAKTION

Ist das Wichtigste auf steilen Anstiegen. Mit dem voll einstellbaren F55 können Sie die Gewichtsverteilung einstellen und die Traktion optimieren.

FAHRKOMFORT

Die Position des Lenkers lässt sich einfach und ohne Werkzeug in Höhe und Winkel verstellen.

BRINGT LICHT INS DUNKEL


Die integrierte LED-Leuchte lässt sich komfortabel am Display einschalten.

SIE HABEN DIE WAHL

Ob Sie mit dem 8,5" Rad durch den Grossstadtdschungel manövrieren oder den erhöhten Fahrkomfort eines 14" Rads geniessen möchten.

NICHT ZU STOPPEN – ES SEI DENN, SIE MÖCHTEN ES

Zwei unabhängige Bremssysteme für mehr Sicherheit: Eine fein dosierbare elektrische Bremse und eine leistungsstarke Scheibenbremse.

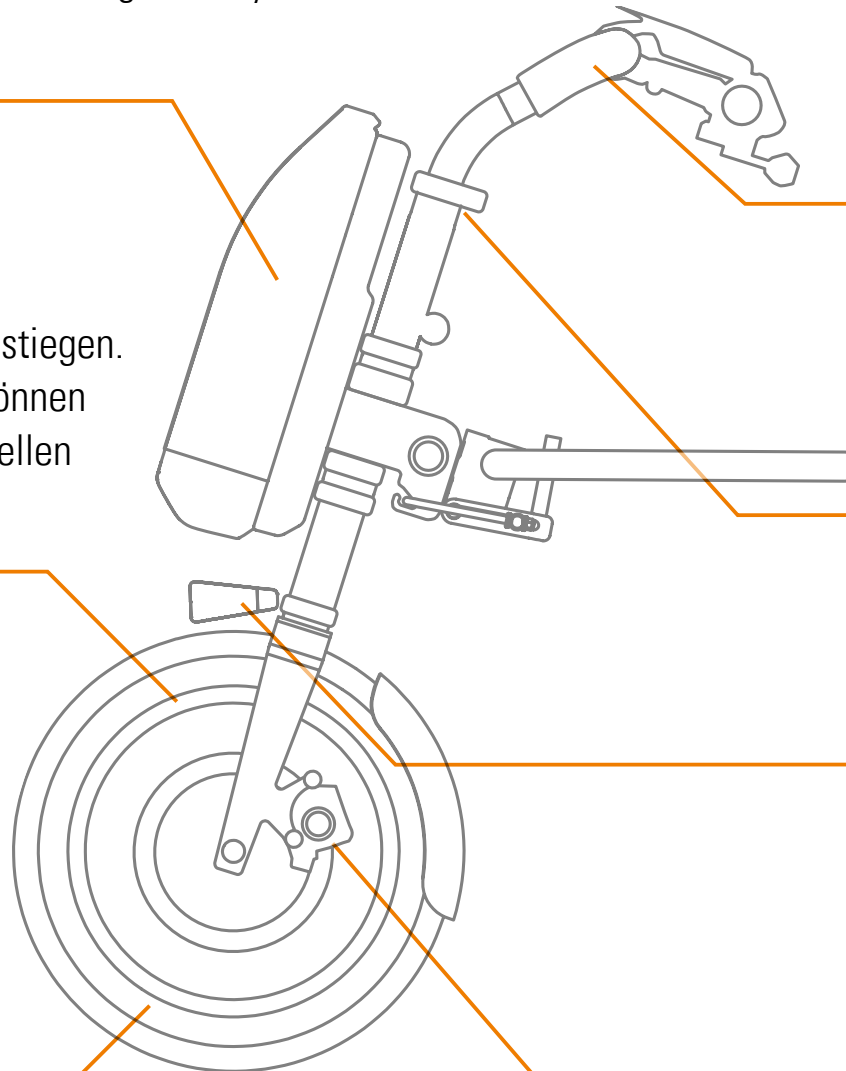

AN IHRER SEITE WANN IMMER ES DARAUF ANKOMMT!



SIE SIND NUR EIN PAAR SEKUNDEN ENTFERNT...

...von Ihren Abenteuern in der Stadt oder auf dem Land: Mit dem einfach zu bedienenden Andockmechanismus können Sie Ihren F55 innerhalb von Sekunden an- und abdocken. So wird der F55 zu einem starken Begleiter in Ihrem täglichen Leben.

Antriebsrad 8,5", Vollgummibereifung,
Anbau für Rollstühle mit festem
Vorderrahmen.



Antriebsrad 14", Luftbereifung,
Anbau für Rollstühle mit festem
Vorderrahmen.



Antriebsrad 8,5", Vollgummibereifung,
Anbau für Rollstühle mit wegschwenk- und
abnehmbaren Fussrasten. Ebenfalls
erhältlich mit Antriebsrad 14", Luftbereifung.



AB NACH DRAUSSEN.




Dank des abklappbaren Zwischenrahmens kann das Packmass des F55 innerhalb von Sekunden minimiert werden. So ergibt sich ein handliches Paket, das sich leicht im Auto verstauen lässt. Bei Bedarf kann der Zwischenrahmen sogar vollständig abgenommen werden.



BEKENNEN SIE FARBE.

**OHNE
AUFPREIS**



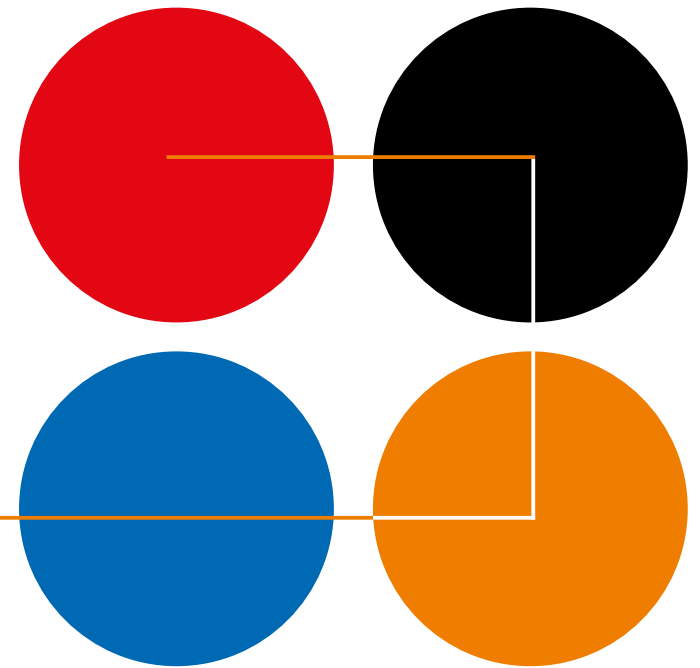

Ihr Leben, Ihr F55: Serienmässig
liegen vier Farbkits in Schwarz,
Blau, Rot und Orange bei, die sich
in wenigen Minuten ganz nach
Lust und Laune austauschen lassen.



TECHNISCHE DATEN

Empulse F55

Betriebsspannung	36 Volt
Reichweite	bis zu 25 km
Steigfähigkeit max.	bis zu 11% (6°)
Frontrahmenbreite	260–480 mm ⁽¹⁾
Zuladung max.	110 kg
Geschwindigkeit max.	6 km/h; optional 10 km/h oder 15 km/h
Antriebsrad	8,5" Vollgummi 14" Luft
Gesamtgewicht	11 kg (ohne Batterie)
Batterie	Lithium-Ionen, 36 V, 8,1 Ah
Batteriegewicht	2 kg
Gesamtgewicht	ab 13 kg (mit Batterie)
Bremssystem	Mechanische Scheibenbremse und elektrische Bremse
Farbe	schwarz
Farbakzente (im Lieferumfang enthalten)	Schwarz, Rot, Blau, Orange (Schwarz montiert)

(1) Die Rahmenbreite wird am Frontrahmen auf Höhe der Montageposition der Andock-Halterungen von Mitte Rahmenrohr zu Mitte Rahmenrohr gemessen und kann von der Sitzbreite abweichen.

Weitere Informationen zu den technischen Daten, Optionen und Zubehör finden Sie im Bestellformular. Änderungen bei den Angaben bleiben jederzeit vorbehalten. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Sunrise Medical. Für sehbehinderte Personen steht dieses Dokument im PDF-Format auf www.SunriseMedical.ch zur Verfügung.



Sunrise Medical AG

Erlenauweg 17
3110 Münsingen
Fon: 031 958 3838
info@sunrisemedical.ch
www.SunriseMedical.ch

