

EINFACH GEHEN





GEMINO – SICHER, KOMFORTABEL & VIELSEITIG

Suchen Sie einen Rollator, der zu Ihrem aktiven Lebensstil passt und mit dem Sie sich bequem und sicher fortbewegen können, egal ob im Freien oder zu Hause? Dann ist ein GEMINO Rollator die perfekte Wahl. Unsere leichten und bewährten Rollatoren setzen neue Massstäbe punkto Qualität, Komfort, Sicherheit und Design... damit Sie sich rundum wohl fühlen und Ihre Unabhängigkeit beibehalten können.

Dank einer grossen Auswahl an Modellen, Grössen, Farben und Zubehör gibt es immer einen GEMINO, der zu 100% Ihren Bedürfnissen und Ihrem persönlichen Stil entspricht! Egal für welches Modell Sie sich entscheiden: Ihr GEMINO bietet Ihnen immer 100% Komfort, Sicherheit und Design.

Sie können sich zu 100% auf ihn verlassen.





100%
KOMFORT



ENTSPANNT GEHEN

Unsere Gemino-Rollatoren wurden im Hinblick auf Komfort und Freude am Gehen entwickelt. Ein leichter Aluminiumrahmen, qualitativ hochwertige Materialien und maximale Stabilität gewährleisten ein hervorragendes Gehgefühl im Innen- und Aussenbereich. Dank der Höhenanpassung mit Memory-Funktion sind die ergonomischen Handgriffe immer in der richtigen Position. Und falls Sie eine Pause benötigen, können Sie sich dank der grosszügigen Sitzfläche einfach ausruhen. Natürlich können Sie Ihren Rollator auch auf Reisen mitnehmen – er lässt sich ganz leicht auf eine kompakte Grösse zusammenfallen.

Entdecken Sie, wie einfach und angenehm Gehen sein kann!

// AUSWAHL DER RAHMENGRÖSSE

Die richtige Rahmengrösse ist ausschlaggebend, damit Sie sicher und bequem gehen. Zudem hat jede Rahmengrösse auch eine andere Sitzhöhe – das ist wichtig für die richtige Haltung beim Sitzen.

// INTELLIGENTE SCHIEBEGRIFF-EINSTELLUNG


Die ergonomischen Schiebegriffe lassen sich schnell und einfach an Ihre Körpergrösse anpassen. Sie werden sicher arretiert und sind aufgrund der speziellen Memory-Funktion immer in der richtigen Höhe.

// LEICHTES ZUSAMMENFALTEN MIT SELBSTVERRIEGELUNGSSYSTEM

Durch sein einzigartiges «Falt-Klick»-System lässt sich Ihr Gemino ganz einfach zusammenfallen und kompakt verstauen. Wenn Sie die Schiebegriffe in die niedrigste Position bringen, können Sie das Packmass sogar noch weiter verringern. So lässt er sich gut im Auto transportieren. Übrigens, in engen Räumen können Sie selbst mit einem (teilweise) zusammengelegten Gemino noch sicher manövrieren.

// PRAKTISCH IM ALLTAG

Ein Gemino-Rollator ist der ideale Begleiter für jeden Tag. Er unterstützt Sie beim Gehen, aber Sie können auf ihm auch bequem sitzen, wenn Sie kurz eine Pause einlegen möchten. Ein komfortabler Rückengurt (optional) gibt Ihnen dabei zusätzlichen Halt. Sie haben viel zu tragen? Mit dem praktischen Korb oder einer schicken Tasche als Zubehör ist das Transportieren von Einkäufen kein Problem (Zuladung max. 10 kg).

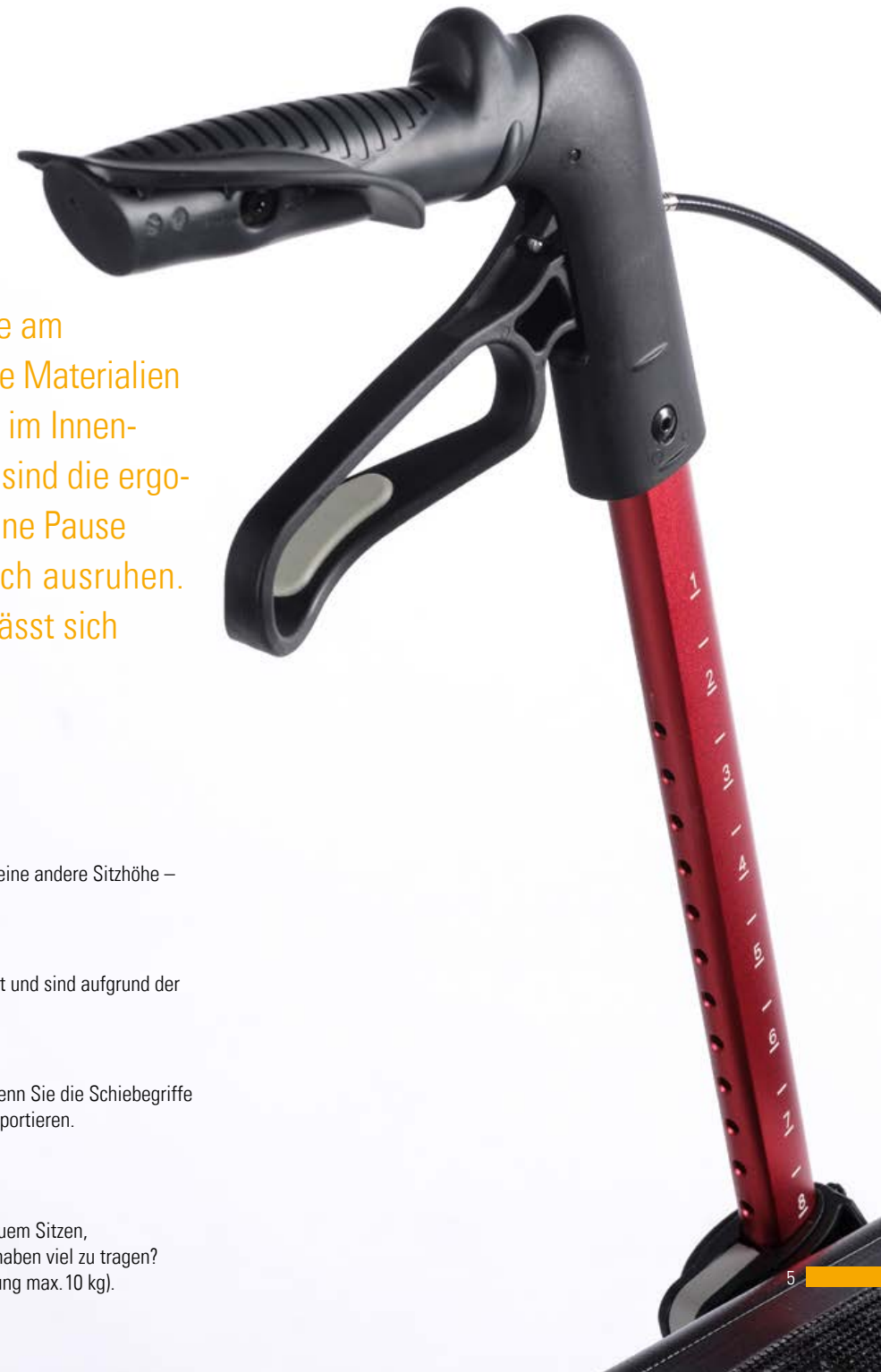

100% SICHERHEIT



WOHIN SIE AUCH GEHEN

Egal wohin Sie gehen, mit einem Gemino-Rollator gehen Sie sicher. Sein kompakter Rahmen garantiert maximale Stabilität auf jedem Untergrund. Und die ergonomisch geformten Schiebegriffe bieten Ihnen stets eine hervorragende Unterstützung. Doch das ist noch nicht alles. Dank vieler zusätzlicher Funktionen sind Sie jederzeit sicher unterwegs.

// ULTRALEICHT ZUBEDIENENDE BREMSEN

Die ergonomisch geformten Bremsgriffe lassen sich mühelos bedienen und gewähren selbst bei leicht abgenutzten Rädern eine optimale Handhabung.

// HINDERNISSE EINFACH ÜBERWINDEN

Die ergonomisch geformte, abgerundete Ankipphilfe lässt Sie Stufen und Schwellen bequem überwinden. Dank der praktischen Kantenabweiser können Hindernisse einfach umfahren werden.

// GUTE SICHTBARKEIT BEI DUNKELHEIT

Sechs integrierte Reflektoren sorgen dafür, dass Sie auch im Dunkeln gut zu sehen sind. Das optional erhältliche Licht trägt zusätzlich zu Ihrer Sicherheit bei.



GEMINO 20



GEMINO 20

QUALITÄT ZUM ATTRAKTIVE

Wenn Sie einen hochwertigen Rollator suchen, der Ihnen ein ganz ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis bietet, sollten Sie sich für den Gemino 20 entscheiden. Dieser Rollator ist sehr leicht und funktionell – und sieht dazu noch gut aus.

Die Basisversion des Gemino 20 ist in drei verschiedenen Rahmengrößen (Farbe silbergrau) erhältlich. Wählen Sie einfach das für Ihre Körpergröße passende Modell und genießen Sie 100% Qualität und Funktionalität – und das zu einem attraktiven Preis.

// 100% GEMINO – DIE KLUGE WAHL FÜR IHRE MOBILITÄT

Von Ihrem Rollator Gemino 20 können Sie ein echtes Gemino-Gehgefühl erwarten. Er hat alle technischen Funktionen des preisgekrönten Gemino 30 und kann mit praktischem Zubehör kombiniert werden.


// EINFACHE LAGERUNG UND TRANSPORTIERBARKEIT

Dank des einzigartigen «Falt-Klick-Systems» lässt sich Ihr Gemino 20 ganz einfach zu einem kompakten Paket zusammenfallen. So lässt er sich gut verstauen und mühelos transportieren.




GEMINO 30


DAS ORIGINAL

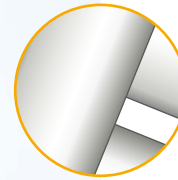


Silver grey

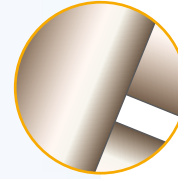


Champagne

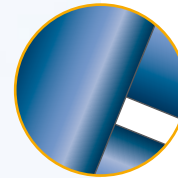


Sapphire blue

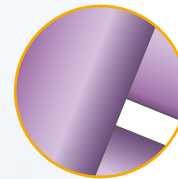


Pink

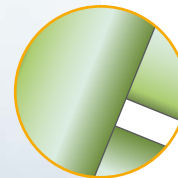

Apple green

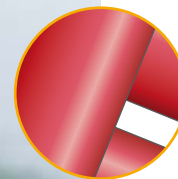

Scarlet red

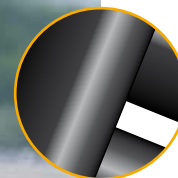

Black

// DAS LEBEN IST BUNT

Jeder Mensch ist einzigartig. Unterstreichen Sie Ihre Individualität mit einer von sechs ansprechenden eloxierten Rahmenfarben.

// RAFFINIERTE TASCHEN ZUM KOMBINIEREN

Ergänzen Sie Ihren Gemino 30 mit einer modischen und praktischen Tasche mit Schulterriemen in Ihrer Lieblingsfarbe!



Graphit



Blau



Mintgrün



Pink



Alcantara schwarz



Grün



Schwarz



Rot



GEMINO 30

STILVOLL UND SICHER GEHEN

Sie suchen nach einem leichten Rollator, der auffällt? Der Ihre Erwartungen in punkto Sicherheit, Qualität, Komfort und Design noch übertrifft? Dann ist der preisgekrönte Gemino 30 die richtige Wahl.

Mit dem Gemino 30 bekommen Sie «das Beste vom Besten». Seine Qualität und Klasse zeigen sich in der hochwertigen Verarbeitung und seinem modernen Design. Dafür wurde der Gemino unter anderem mit dem Red Dot Design Award und iF Product Design Award ausgezeichnet.



GEMINO 30

Carbon



GEMINO 30 CARBON

DER PREMIUM CARBON ROLLATOR FÜR EINEN AKTIVEN LEBENSSTIL

Darf es etwas Besonderes sein? Ausgestattet mit allen Vorteilen des Gemino 30, wie z. B. dem einzigartigen Falt-Klick-System und der grossen Auswahl an Zubehör, ist der Gemino 30 Carbon die richtige Wahl für alle, die das Besondere suchen. Besonders leicht, besonders elegant und besonders wendig sind die Eigenschaften, die unseren Premium-Rollator auszeichnen.

// SUPERLEICHT

Dank seinem geringen Gewicht von 5,4 (M) / 5,6 kg lässt sich der Gemino 30 Carbon leicht heben, ist einfach zu transportieren und aufzubewahren und ist auch auf engem Raum super wendig.

// BEWEGUNGSFREIHEIT DER BEINE

Parallele Vorderrohre ermöglichen eine grössere Sitzfläche, da die Beine nicht an die Rohre stossen.

// IM RAHMEN INTEGRIERTES TRITTROHR

Das Trittrohr wurde unauffällig in den Carbon-Rahmen integriert und ermöglicht es, Bordsteine leicht zu überwinden.





100%
LEICHTIGKEIT



// ANATOMISCH GEFORMTE HANDGRIFFE

Ergonomisch geformte Handgriffe bieten zusätzlichen Komfort und ein sicheres Gefühl für den Halt beim Gehen.



// CARBON RAHMEN

Carbon zeichnet sich durch extreme Festigkeit und Steifigkeit bei gleichzeitig geringem Gewicht aus und macht den Gemino 30 Carbon zum perfekten Begleiter für einen aktiven Lebensstil.



// VERSTELLBARE KOMFORTRÜCKENSTÜTZE

Für zusätzlichen Komfort wählen Sie diese grosse, weich gepolsterte Rückenstütze. Schnell einstellbar und leicht mit dem Rollator faltbar.



// VIEL PLATZ FÜR EINKÄUFE

Viel zu transportieren? Die moderne Netztasche lässt sich leicht mit einer Hand öffnen, bietet viel Platz für Einkäufe und trägt bis zu 5 kg.



GEMINO 30

Comfort



GEMINO 30 COMFORT

KOMPROMISSLOS IM INNEN- UND AUSSENBEREICH

Suchen Sie nach einem leichten Rollator, mit dem Sie bequem und sicher, sowohl drinnen als auch draussen unterwegs sein können? Dann ist der Gemino 30 Comfort Rollator die perfekte Wahl für Sie.

// RÄDER, DIE DEN UNTERSCHIED MACHEN

Schlendern Sie durch die Kopfsteinpflasterstrassen oder geniessen Sie einen Waldspaziergang. Die grossen, weichen, stossdämpfenden Räder ermöglichen ein bequemes Gehen – in jedem Gelände.

// VERWENDUNG IM INNEN- UND AUSSENBEREICH

Der kompakte Rahmen sorgt für hohe Manövrierbarkeit und die grossen, weichen Räder ermöglichen es Ihnen, Hindernisse mit Leichtigkeit zu überwinden, egal ob es sich um Türschwellen oder Bordsteine handelt.

// EINFACHE HANDHABUNG VON EXTRA ZULADUNG

Viel zu tragen? Der extra starke Korb trägt bis zu 10 kg.



GEMINO 60



// DER FEINE UNTERSCHIED

Mit den extragrossen, weichen Rädern bewältigen Sie buchstäblich jedes Hindernis mit Leichtigkeit.



// AUSGEZEICHNETE STABILITÄT

Der robuste, besonders breite und lange Rahmen des Gemini 60 gewährleistet zusammen mit den grossen Rädern eine hervorragende Stabilität und Sicherheit, selbst auf unebenem Untergrund.



// MEHR RAUM FÜR SIE

Der grosse Radabstand bietet zusätzlichen Raum zum Gehen und eine sehr grosszügige Sitzfläche: Ideal, wenn Sie eine Pause einlegen möchten.



// EXTREM BELASTBAR

Alle Modelle des Gemini 60 eignen sich für eine starke Beanspruchung und ein maximales Benutzergewicht von 150 kg. Sie haben viel zu tragen? Der besonders robuste Korb trägt bis zu 10 kg.



GEMINO 60

KOMFORT UND SICHERHEIT AUF JEDEM UNTERGRUND

Der Gemino 60 ist der perfekte Begleiter für alle, die keine Kompromisse machen wollen. Er ist leicht und trotzdem robust. Dank seiner extragrossen, weichen Räder begleitet er Sie selbst auf unebenem Untergrund sicher und zuverlässig. Ein Bummel über das Kopfsteinpflaster der Altstadt, ein erholsamer Waldspaziergang oder einfach nur die Türschwelle in Ihrem Zuhause meistern? All das ist mit dem robusten Gemino 60 möglich!

Der Gemino 60 ist besonders gut für Outdoor-Aktivitäten geeignet und extrem belastbar. Dank Faltmechanismus lässt er sich zudem schnell und einfach zusammenfallen und bequem im Auto transportieren.



GEMINO 30

Walker



MEHR STABILITÄT

Der Gemini 30 Walker ist besonders für Menschen geeignet, die beim Gehen zusätzlichen Halt und mehr Unterstützung brauchen. Er vereint die Vorteile des Gemini 30 mit einem Plus an Stabilität und eignet sich hervorragend für das Gehtraining.

// VERSTELLBARE UNTERARMAUFLAGEN

Die Unterarmauflagen lassen sich ganz einfach in Höhe, Tiefe und Neigung verstellen und so individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen. Die integrierten Brems- und Handgriffe sind gut zu erreichen und kinderleicht zu bedienen.

// ERWEITERTE BREMSOPTIONEN

Sie brauchen noch mehr Sicherheit? Ergänzen Sie Ihren Gemini 30 Walker mit einer Schleppbremse oder dem innovativen Bremssystem SpeedControl.

Mit SpeedControl bremst Ihr Rollator automatisch, sobald sich Ihre Gehgeschwindigkeit erhöht. Dadurch wird eine aufrechte Körperhaltung unterstützt und Sie gehen sicher und entspannt an Ihrem Rollator.



3-STUFIGES BREMSYSTEM



GEMINO 30

Walker



FÜR DRINNEN UND DRAUSSEN

Sie sind viel unterwegs? Der Gemini 60 Walker begleitet Sie zuverlässig und gibt Ihnen dank seiner extragrossen, weichen Räder mehr Stabilität und Sicherheit beim Gehen – besonders draussen.

// KOMFORT UND SICHERHEIT

Die stabile Rahmenkonstruktion und die extragrossen, weichen Räder garantieren ein absolut komfortables und sicheres Gehen. Egal ob Kopfsteinpflaster oder Türschwellen – mit dem Gemini 60 Walker überwinden Sie jedes Hindernis mit Leichtigkeit.



GEMINO 30

SpeedControl



// AUCH FÜR KINDER

Der Gemino 30 S SpeedControl, das kleinste Modell, ist auch für Kinder geeignet und in verschiedenen Farben erhältlich. Mit ihm haben sie alle Möglichkeiten, die Welt zu entdecken und absolute Sicherheit beim Gehen.



GEMINO 30 SPEEDCONTROL

DIE ROLLATOR INNOVATION

Der Gemino 30 SpeedControl mit seinem innovativen dynamischen Bremssystem gibt Ihnen maximale Kontrolle beim Gehen. So fühlen Sie sich völlig sicher und sind entspannt unterwegs. SpeedControl fördert eine gleichmässige Gehgeschwindigkeit, unterstützt eine bessere, aufrechte Körperhaltung und verhindert, dass Ihnen der Rollator «wegrollt».

//3-STUFIGES BREMSSYSTEM

Das innovative SpeedControl-Bremssystem kann je nach Bedarf in drei Stufen auf Ihre Bedürfnisse eingestellt werden. Sobald sich Ihre Gehgeschwindigkeit erhöht, werden die Fliehkraftbremsen an den Hinterrädern automatisch aktiviert. Dieser Widerstand ist natürlich nicht zu spüren, wenn Sie langsam gehen oder der Weg ansteigt.



GEMINO 30

Parkinson



IN BEWEGUNG BLEIBEN

Der Gemino 30 Parkinson wurde speziell für Menschen mit Parkinson entwickelt und bietet spezielle Funktionen zur Unterstützung bei Gehblockaden und Gleichgewichtsstörungen.

// GLEICHMÄSSIG GEHEN

Der Gemino 30 Parkinson ist mit einer Schleppbremse ausgestattet, die zusätzlichen Widerstand bietet und eine gleichmäßige Gehgeschwindigkeit fördert. Die Stärke des Widerstands können Sie ganz einfach an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen.

// MEHR SICHERHEIT MIT UMKEHRBREMSE

Dank des Umkehrbremssystems hält der Rollator sofort an, sobald die Bremse losgelassen wird. Dies erhöht die Sicherheit, wenn Sie beim Gehen das sogenannte «Freezing» (Einfrieren) erleben – das Gefühl, dass Sie Ihre Füße nicht mehr bewegen können.

// GEHBLOCKADEN ÜBERWINDEN

Im Fall einer Blockade, die das Weiterlaufen unmöglich macht, kann mit einer Taste auf dem Handgriff eine Laserlinie erzeugt werden. Indem Sie sich auf die rote Linie konzentrieren und sie überschreiten, können Sie die Blockade lösen und kommen wieder in Bewegung.



100% AUSWAHL PRAKTISCHES ZUBEHÖR FÜR SIE

Für unsere Gemino-Rollatoren gibt es ein umfassendes Angebot an attraktivem Zubehör. Eine modische Tasche, ein praktischer Stockhalter, eine bequemer Rückengurt oder Licht für mehr Sicherheit? Wählen Sie einfach die Optionen, die Ihren Bedürfnissen und Ihrem Lebensstil entsprechen!

// RAFFINIERTER TASCHEN IN VIELEN FARBEN*

Ergänzen Sie Ihren Gemino mit einer verschliessbaren Tasche in Ihrer Lieblingsfarbe! Mit Tragegriffen und Schulterriemen für ein einfaches Tragen.



Blau



Graphit



Schwarz



Pink



Grün



Rot



Alcantara schwarz



Mintgrün



*Nicht verfügbar für Gemino 60 M/60 M Walker





// REGENSCHIRM

Mit dem höhenverstellbaren Regenschirm können Sie beide Hände an den Schiebegriffen lassen und sind so auch bei Regenwetter sicher unterwegs.



// RÜCKENGURT

Wenn Sie eine Pause machen möchten, unterstützt Sie der Rückengurt beim sicheren und bequemen Sitzen. Er muss beim Zusammenfallen des Rollators nicht abgenommen werden.



// VERSTELLBARER KOMFORT-RÜCKENGURT

Wählen Sie für zusätzlichen Komfort diesen grossen, weich gepolsterten Rückengurt aus. Er ist individuell anpassbar und lässt sich leicht mit dem Rollator zusammenklappen.



// TABLETT

Praktisches Tablett mit Getränkehalter für den sicheren und einfachen Transport von Speisen und Getränken.



// STOCKHALTER

Hält Ihre Krücke oder Ihren Gehstock beim Gehen sicher befestigt. Leicht zu montieren, leicht zu erreichen.



// KORB FÜR SAUERSTOFF-FLASCHEN

Tragetasche mit Schulterriemen für den sicheren Transport von Sauerstoffflaschen.




// SCHLEPPBREMSE

Bietet zusätzlichen Widerstand, um Sie bei einem gleichmässigen Gehtempo zu unterstützen. Ganz leicht auf die gewünschte Stufe anzupassen und einfach zu aktivieren/deaktivieren.



// UNIVERSALHALTERUNG

Geeignet um persönliches Zubehör am Rollator zu befestigen.

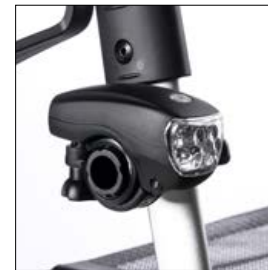


// LICHT

Sorgt dafür, dass Sie in der Dunkelheit gut sichtbar sind und damit für zusätzliche Sicherheit.



// INFUSIONSHALTERUNG

Höhen- und neigungsverstellbare Tropfhalterung.

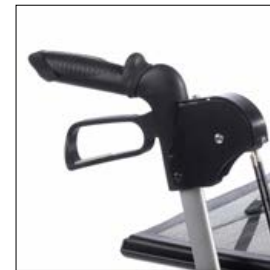

// EINHANDBREMSE

Bequeme und sichere Bedienung mit einer Hand.



// UMKEHRBREMSE

Der Rollator bleibt sofort stehen, wenn die Bremse gelöst wird.



Bremst automatisch bei einer plötzlichen Beschleunigung

// SPEEDCONTROL

Mit dem innovativen SpeedControl-Bremssystem, das für alle Modelle des Geminio 30 verfügbar ist, fühlen Sie sich beim Gehen völlig sicher. Ihr Rollator bremst automatisch, wenn Ihre Gehgeschwindigkeit zunimmt und gewährleistet so jederzeit ein gleichmässiges Gehen und eine angenehme, aufrechte Haltung. Wenn Sie in normaler Geschwindigkeit gehen oder wenn der Weg ansteigt, ist der Widerstand natürlich nicht zu spüren.



// STABILISIERUNGSSTANGE

Sichereres Gefühl, leicht abnehmbar für den Transport.

Verfügbarkeit pro Modell: Siehe Bestellblätter.



MODELLÜBERSICHT



GEMINO 20

Leichter Design-Rollator. Hervorragende Funktionen zum attraktiven Preis.



Verwendung im Innen- und Aussenbereich

Tägliche Nutzung



150 kg
130 kg (M)
125 kg (S)



1500 - 2000 mm
1350 - 1700 mm (M)
1250 - 1650 mm (S)
Auch für Kinder geeignet



Kleiner Wendekreis für hohe Wendigkeit im Innenbereich



GEMINO 30 GEMINO 30 Carbon

Unser Original. Preisgekröntes Design vereint mit hoher Wendigkeit im Innenbereich und starker Leistung im Aussenbereich. Viele Farboptionen und umfangreiches Zubehör für eine einfache, individuelle Anpassung.



Verwendung im Innen- und Aussenbereich, hauptsächlich in der Stadt

Tägliche Nutzung



150 kg
130 kg (M)
125 kg (S)



1500 - 2000 mm
1350 - 1700 mm (M)
1250 - 1650 mm (S)
Auch für Kinder geeignet



Kleiner Wendekreis für hohe Wendigkeit im Innenbereich



Einfache Personalisierung durch Rahmenfarben und Taschenfarben. Breites Angebot an Zubehör



Gemino 30 Carbon nur in Karbon schwarz erhältlich

Superleicht: 5,4 (M) / 5,6 kg
Karbon Version erhältlich für einfachen Transport und leichtes Heben



GEMINO 30 Comfort

Entwickelt für komfortables Gehen im Innen- und Aussenbereich, auch auf unebenem Gelände. Grosse, weiche Räder ermöglichen das mühelose Überwinden von Hindernissen.



Verwendung im Innen- und Aussenbereich, auch auf unwegsamem Gelände.

Tägliche / aktive Nutzung



150 kg
130 kg (M)



1500 - 2000 mm
1350 - 1700 mm (M)



Extragrosse und weiche Räder sorgen für ultimativen Komfort und einfache Überwindung jedes Hindernisses



Extrastarke Tasche (10 kg Tragkraft)



GEMINO 60

GEMINO 30 Walker

GEMINO 60 Walker

GEMINO 30 SpeedControl

GEMINO 30 Parkinson

Für jede Art von Gelände und starke Beanspruchung entwickelt. Leicht und trotzdem robust.

Leichte Gehhilfe mit verstellbarer Unterarmauflage. Der perfekte Begleiter, wenn Sie zusätzliche Unterstützung und Stabilität im Innenbereich benötigen. Auch für das Gehtraining geeignet.

Optimale Unterstützung und Stabilität – im Innen- und Aussenbereich. Vereint das komfortable Laufverhalten und die Stabilität des Gemino 60 mit der zusätzlichen Unterstützung und Sicherheit, die Sie von einer Gehhilfe erwarten.

Für zusätzliche Sicherheit werden die Bremsen an den Hinterrädern bei einer plötzlichen Beschleunigung automatisch aktiviert. Für das Gehtraining geeignet.

Speziell für Personen mit Parkinson entwickelt. Mit Schleppbremse, für ein gleichmässiges Gehtempo, Umkehrbremsystem und Laserlicht zur Hilfe beim «Freezing».



Vorwiegend Verwendung im Aussenbereich, auch auf unwegsamem Gelände, gelegentlich Innenbereich



Verwendung im Innenbereich



Verwendung im Innen- und Aussenbereich, auch auf unebenem Untergrund



Verwendung im Innen- und Aussenbereich, hauptsächlich in der Stadt



Verwendung im Innen- und Aussenbereich, hauptsächlich in der Stadt

Aktive Nutzung / starke Beanspruchung

Tägliche Nutzung / Gehtraining

Tägliche Nutzung / Gehtraining

Tägliche Nutzung

Tägliche Nutzung



150 kg
150 kg (M)



150 kg
130 kg (M)



130 kg
130 kg (M)



100 kg



130 kg
130 kg (M)



1500 - 2000 mm
1350 - 1700 mm (M)



1500 - 2000 mm
1350 - 1700 mm (M)



1500 - 2000 mm
1350 - 1700 mm (M)



1500 - 2000 mm
1350 - 1700 mm (M)
1250 - 1650 mm (S)
Auch für Kinder geeignet



1500 - 2000 mm
1350 - 1700 mm (M)



Extra breiter und langer Rahmen für besondere Stabilität



Höhenverstellbare Unterarmauflage für mehr Halt und Stabilität



Höhenverstellbare Unterarmauflage für mehr Halt und Stabilität



Kleiner Wendekreis für hohe Wendigkeit im Innenbereich



Kleiner Wendekreis für hohe Wendigkeit im Innenbereich



Extragrosse und weiche Räder sorgen für ultimativen Komfort und einfache Überwindung jedes Hindernisses



Kleiner Wendekreis für hohe Wendigkeit im Innenbereich



Extra breiter und langer Rahmen für besondere Stabilität



Bei einer plötzlichen Beschleunigung leisten die SpeedControl-Räder automatisch Widerstand



Schleppbremse: Der Rollator hält sofort an, sobald die Bremse losgelassen wird



Extrabreite Sitzfläche



Verlangsamungsbremse bietet zusätzlichen Widerstand und fördert ein gleichmässiges Gehtempo



Extrastarke Tasche (10 kg Tragkraft)




Extrastarke Tasche (10 kg Tragkraft)




Laserlicht kann aktiviert werden, um Gehblockade zu überwinden



GEMINO – TECHNISCHE DATEN

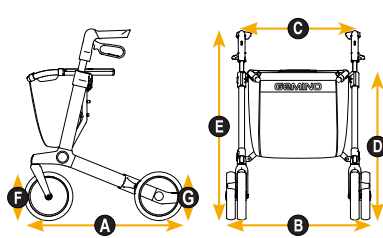

		GEMINO 20			GEMINO 30 GEMINO 30 Carbon			GEMINO 30 Comfort	
		20	20M	20S	30	30M	30S	30	30M
ABMESSUNGEN									
Maximales Körpergewicht des Fahrers	kg	150	130	125	150	130	125	150	130
Empfohlene Grösse des Benutzers	mm	1500 - 2000	1350 - 1700	1250 - 1650	1500 - 2000	1350 - 1700	1250 - 1650	1500 - 2000	1350 - 1700
Maximale Traglast im Korb	kg	5	5	5	5	5	5	10	10
Gesamtlänge A	mm	650	650	680	650	650	680	680	680
Gesamtbreite B	mm	600	600	550	600	600	550	600	600
Gesamtgewicht ohne Korb (mit Korb)	kg	7,1 (7,3)	7,0 (7,2)	6,6 (6,8)	7,1 (7,4) 5,6 (5,9) Karbon	7,0 (7,3) 5,4 (5,7) Karbon	6,6 (6,8)	8 (7,7)	7,8 (7,5)
Breite zwischen der Mitte der Handgriffe C	mm	470	470	420	470	470	420	470	470
Sitzhöhe D	mm	620	550	480	620	550	480	640	570
Gesamthöhe E	mm	780 - 1000	690 - 880	650 - 770	780 - 1000	690 - 880 730 - 880 Carbon	650 - 770	800 - 1020	710 - 900
Gesamthöhe zusammengeklappt	mm	800	760	690	800	760	690	820	770
Gesamtlänge zusammengeklappt	mm	650	650	680	650	650	680	680	680
Gesamtbreite zusammengeklappt	mm	230	230	230	230	230	230	230	230
Durchmesser der Vorderräder F	mm	200 x 36	200 x 36	200 x 36	200 x 36	200 x 36	200 x 36	230 x 42	230 x 42
Durchmesser der Hinterräder G	mm	200 x 36	200 x 36	200 x 36	200 x 36	200 x 36	200 x 36	230 x 42	230 x 42
LEISTUNG									
Wendekreis	mm	840	840	790	840	840	790	880	880
FARBAUSWAHL									
Grey		✓	✓	✓					
Black					✓				
Silver grey					✓ Karbon n/v	✓ Karbon n/v	✓	✓	✓
Champagne					✓ Karbon n/v	✓ Karbon n/v			
Sapphire blue					✓ Karbon n/v	✓ Karbon n/v	✓	✓	✓
Pink					✓ Karbon n/v		✓		
Apple green					✓ Karbon n/v	✓ Karbon n/v			
Scarlet red					✓ Karbon n/v	✓ Karbon n/v		✓	✓
ZERTIFIKATE									
CE		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 12182		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ISO 11199-2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ISO 11199-3									

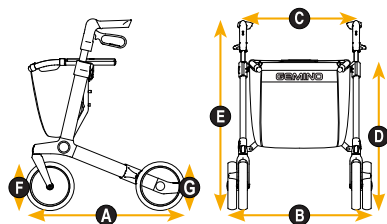

		GEMINO 60		GEMINO 30 Walker		GEMINO 60 Walker		GEMINO 30 SpeedControl			GEMINO 30 Parkinson	
		60	60M	30	30M	60	60M	30	30M	30S	30	30M
ABMESSUNGEN												
Maximales Körpergewicht des Fahrers	kg	150	150	150	130	130	130	100	100	100	130	130
Empfohlene Grösse des Benutzers	mm	1500 - 2000	1350 - 1700	1500 - 2000	1350 - 1700	1500 - 2000	1350 - 1700	1500 - 2000	1350 - 1700	1250 - 1650	1500 - 2000	1350 - 1700
Maximale Traglast im Korb	kg	10	10	5	5	10	10	5	5	5	5	5
Gesamtlänge A	mm	740	740	650	650	740	740	650	650	680	650	650
Gesamtbreite B	mm	640	640	610	610	640	640	600	600	550	600	600
Gesamtgewicht ohne Korb (mit Korb)	kg	8,5 (8,8)	8,2 (8,5)	10,6 (10,9)	10,4 (10,7)	11,8 (12,1)	11,6 (11,9)	8,7 (8,9)	8,6 (8,8)	8,2 (8,4)	7,5 (7,8)	7,4 (7,7)
Breite zwischen der Mitte der Handgriffe C	mm	510	510	255	255	320	320	470	470	420	470	470
Sitzhöhe D	mm	620	530	620	550	620	530	620	550	480	620	550
Gesamthöhe E	mm	760 - 950	730 - 830	980 - 1115	840 - 1000	985 - 1155	895 - 985	780 - 1000	690 - 880	650 - 770	780 - 1000	690 - 880
Gesamthöhe zusammengeklappt	mm	840	800	970	890	1090	1010	800	760	690	800	760
Gesamtlänge zusammengeklappt	mm	740	740	650	650	740	740	650	650	680	650	650
Gesamtbreite zusammengeklappt	mm	230	230	355	355	355	355	230	230	230	230	230
Durchmesser der Vorderräder F	mm	280 x 42	280 x 42	200 x 36	200 x 36	280 x 42	280 x 42	200 x 36	200 x 36	200 x 36	200 x 36	200 x 36
Durchmesser der Hinterräder G	mm	230 x 42	230 x 42	200 x 36	200 x 36	230 x 42	230 x 42	200 x 36	200 x 36	200 x 36	200 x 36	200 x 36
LEISTUNG												
Wendekreis	mm	950	950	840	840	950	950	840	840	790	840	840
FARBAUSWAHL												
Grey												
Black												
Silver grey		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Champagne												
Sapphire blue										√	√	
Pink										√		
Apple green												
Scarlet red												
ZERTIFIKATE												
CE		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
EN 12182		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
ISO 11199-2		√	√					√	√	√	√	√
ISO 11199-3				√	√	√	√					



Weitere Informationen zu den technischen Daten, Optionen und Zubehör finden Sie in den Bestellblättern. Änderungen bei den Angaben bleiben jederzeit vorbehalten. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Sunrise Medical.



Sunrise Medical AG

Erlenauweg 17
3110 Münsingen
Fon: 031 958 3838
cs@sunrisemedical.ch
www.SunriseMedical.ch

Weitere Informationen zu den technischen Daten, Optionen und Zubehör finden Sie im Bestellblatt. Änderungen bei den Angaben bleiben jederzeit vorbehalten. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Sunrise Medical. Für sehbehinderte Personen steht dieses Dokument im PDF-Format auf: www.SunriseMedical.ch zur Verfügung.