

Q50 R

Überall hinstellen. Überall hinfahren.



MACHEN SIE SICH BEREIT, FÜR DIE REISE MIT DEM Q50 R

Entdecken Sie den **QUICKIE Q50 R**, den Elektrorollstuhl, der sich in Sekundenschnelle ganz einfach auf die Grösse eines Koffers falten lässt! Verstauen Sie ihn, wo immer Sie wollen und fahren Sie mit Ihrem Q50 R wohin Sie wollen.

Sie brauchen einen Elektrorollstuhl, aber Stühle mit grossen Rahmen und schweren Batterien sind nichts für Sie. Wenn Sie einen Stuhl wollen, der sich leicht im Kofferraum, Zug oder Flugzeug transportieren lässt, ist der **QUICKIE Q50 R** das perfekte Modell.

Der Q50R hat alles, was Sie brauchen! 8"- und 12"-Vollgummiräder, Antriebsräder mit Spritzschutz, Doppelaufhängungssystem, klappbare Armlehnen mit Positionssperre, abnehmbare und höhenverstellbare Rückenlehne mit verstellbarem Rückenbespann, Polster, gepolsterter Schiebebügel, Rückenlehnentasche mit Reissverschluss, Lithiumbatterie... Damit können Sie bequem bis zu **50 km*** fahren.



Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone, um das Video zu sehen.

UNSER ELEKTROLLSTUHL, DER AM EINFACHSTEN ZU TRANSPORTIEREN IST!

Der einfache Transport in Kombination mit der Leichtigkeit, mit der sich der Q50 R in wenigen Sekunden falten lässt, machen ihn zum idealen Reisebegleiter.



800 mm

400 mm

**Die Reichweite wurde nach ISO 7176 (Absatz 4) für den theoretischen Energieverbrauch von Rollstühlen berechnet.*

EINFACHES FALTEN FÜR DEN TRANSPORT

Der Q50 R lässt sich in Sekundenschnelle falten, so einfach wie ein Kinderwagen. Lösen Sie den Verriegelungshebel, klappen Sie die Fußstütze um und schieben Sie die Rückenlehne nach unten. Müheles und ohne Werkzeug oder Ausbau der Batterie.



IM KOFFERRAUM... KEIN PROBLEM

Mit seinem Gewicht von **37,5kg** und seiner kompakten Abmessung lässt er sich sehr einfach aus jedem grossen Kofferraum entladen, ohne dass spezielle Rampen oder ein angepasstes Fahrzeug erforderlich sind. Sie können sogar den Akku entfernen, um das Gewicht auf nur **32 kg** zu reduzieren.



Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone, um das Video zu sehen.

BEDIENUNG IN INNENRÄUMEN

Sie werden ihn immer bei sich haben wollen, egal ob Sie zu Hause, beim Einkaufen oder in öffentlichen Verkehrsmitteln sind. Die kompakte Grösse des Q50 R und die einfache Bedienung – dank des intuitiven Joysticks, der sehr präzise auf Joystick-Bewegungen reagiert – ermöglichen es Ihnen, sich in jeder Situation problemlos zu bewegen, auch wenn der Platz knapp ist.



KOMPAKTE BASIS

Befürchten Sie, mit Ihrem Rollstuhl gegen Möbel und Ecken in Ihrer Wohnung zu stossen? Das muss nicht sein, denn mit nur **600 mm** Gesamtbreite können Sie problemlos durch enge Türöffnungen fahren oder in engen Räumen manövrieren.

EINFACHER TRANSFERT

Das Hochklappen der Armlehnen – die zudem über eine Arretierposition verfügen – erleichtern Ihnen den Transfer in und aus dem Q50 R. Sie können auch die Fußraste hochklappen und, was noch wichtiger ist, sie unter den Sitz klappen, so dass viel Platz für Ihre Füße bleibt.



Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone, um das Video zu sehen.



1220 mm

WENDEKREIS

Der Quickie Q50 R hat einen Wendekreis von nur 1220 mm und ist damit ideal für den Einsatz in Innenräumen. Jetzt kommen Sie auch in engen Fluren, Küchen und anderen engen Räumen ohne komplizierte Manöver zurecht.



VSI ELEKTRONIK

Der Q50 R nutzt VSI-Elektronik von Curtiss-Wright, einer weltweit führenden Marke, die für hohe Qualität und Zuverlässigkeit bekannt ist. Die einfache, integrierte, wegschwenkbare Joystick-Steuerung, in Kombination mit der hochwertigen 30-Ah-Lithiumbatterie, bietet präzise Lenkung, Langlebigkeit und geringen Wartungsaufwand.



LEISTUNG IM FREIEN

Der Q50 R ist mehr als nur ein kompakter, faltbarer Elektrorollstuhl. Entdecken Sie seine Leistung im Freien. Lassen Sie das Auto zu Hause, klappen Sie Ihren Q50 R auf und schon können Sie losfahren, wohin Sie wollen.

DOPPELAUFHÄNGUNGSSYSTEM

Elastomere im vorderen Bereich reduzieren Vibrationen und Geräusche deutlich und helfen zusammen mit den hinteren Stossdämpfern, die sich unter dem Sitz befinden, Stöße beim Überfahren von Schlaglöchern oder unebenem Gelände abzufedern. So genießen Sie eine ruhige Fahrt und der Q50 R erledigt den Rest.

TRAKTION

Ausgestattet mit **12"-Antriebsrädern** für optimale Outdoor-Performance, die eine gute Traktion auf verschiedenem Gelände bieten. Ausserdem sind sie mit einem Radspritzschutz ausgestattet, die Sie während der Fahrt vor Spritzern oder Schotter schützen.



STABILITÄT

Seine Gesamtlänge von **1030 mm** verleiht ihm ein höheres Mass an Stabilität, so dass Sie Steigungen von bis zu 8 Grad sicher befahren können. Ausserdem ist er serienmässig mit Sicherheitsrädern ausgestattet.

ROBUST

Die ovalen Rahmenrohre des Q50 R machen das Chassis steifer und widerstandsfähiger gegen Durchbiegung. Dies führt zu einem sehr komfortablen Fahrverhalten – und das mit einer **5-Jahres-Garantie** auf den Rahmen.



HOHE LEISTUNG UND EFFIZIENZ

Wir entwickeln seit über 40 Jahren Elektrostühle und arbeiten mit renommierten Herstellern zusammen, um robuste Stühle mit der besten Fahrleistung, Reichweite und Zuverlässigkeit zu liefern, die andere nicht bieten können.

50 mm

KANTENSTEIGFÄHIGKEIT

Ausgestattet mit effizienten, bürstenlosen und wartungsfreien 200-Watt-Motoren, die Ihnen die nötige Kraft geben, um Hindernisse bis zu 50 mm zu überwinden. Durch die Positionierung in einer Linie mit der Radachse wird zudem der Wirkungsgrad optimiert.



«LEERLAUF»-MODUS

Die Motoren bieten im «Leerlauf»-Modus nur einen sehr geringen Widerstand, so dass Sie den Rollstuhl mit geringem Kraftaufwand manuell bewegen können. Zusätzlich ist das obere Rückenrahmenrohr gepolstert und bietet so einen komfortablen Griff zum Schieben des Rollstuhls.

500

KM REICHWEITE

Dank der optimierten Effizienz unseres Motors kann der Q50 R mit seiner Lithium-Batterie eine beeindruckende Reichweite von 50 km* bieten (mit einer einzigen Ladung).




30 AH LITHIUM BATTERIE

Bei einem Gewicht von nur **5,5 kg** können Sie den Akku mühelos zum Aufladen entnehmen. Er kann auch entfernt werden, wenn der Stuhl gefaltet ist.

AUFLADEN, SELBST IN GEFALTETEM ZUSTAND!

Wenn der Stuhl gefaltet ist, müssen Sie den Akku nicht entfernen, da der Q50 R über einen Ladeanschluss an der Unterseite des Joysticks verfügt.

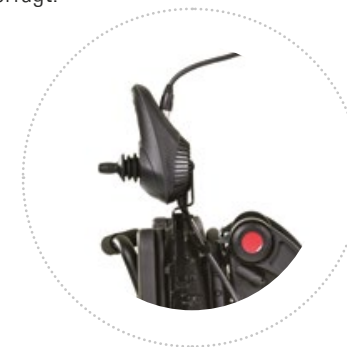

Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone, um das Video zu sehen.

**Die Reichweite wurde nach ISO 7176 (Absatz 4) für den theoretischen Energieverbrauch von Rollstühlen berechnet.*

MACHEN SIE ES SICH BEQUEM

Wo auch immer Sie hinfahren, was auch immer Sie tun, Sie werden sich in Ihrem Q50 R immer wohlfühlen.




Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone, um das Video zu sehen.

450 mm
550 mm

HÖHENVERSTELLBARER RÜCKEN

Brauchen Sie mehr Unterstützung für den Rücken? Durch einfaches Lösen der Drehschrauben, auf der Rückseite der Rückenlehnenrohre, lässt sich die Höhe der Rückenlehne von 450 bis 500 mm einstellen. Der Durchmesser der Rückenlehnenrohre ermöglicht es Ihnen auch JAY-Rücken zu montieren.

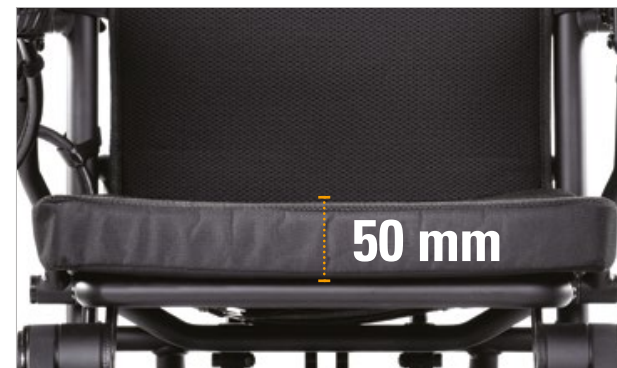

SCHAUMSTOFFKISSEN ALS STANDARD

Das Schaumstoffkissen bietet nicht nur Komfort, sondern hat auch einen atmungsaktiven Bezug, der die Körperwärme durchlässt und Sie auf langen Fahrten kühl und trocken hält.



ANPASSBARER SITZ- UND RÜCKBESPANN

Der Bezug der Rückenlehne und die Sitzfläche sind mit verstellbaren Velcrobändern ausgestattet, so dass sie nie an Stabilität verlieren und Sie sie bei Bedarf straffen können, um sie an Ihre Körperform und Ihren Komfort anzupassen.

DER EIGENE TOUCH

Erhältlich mit einem stilvollen mattschwarzen Rahmen und 3 Farbakzenten, um die Details nach Ihrem Geschmack zu gestalten!

GRÜN

BLAU

ROT

AUFBEWAHRUNGSTASCHE

Der Q50 R verfügt über zwei geräumige Aufbewahrungstaschen mit Reißverschluss. Eine an der Rückenlehne und eine unter dem Sitz, in denen Sie Ihre Wertgegenstände verstauen können.



TECHNISCHE DATEN / Q50 R

Zuladung max.	136 kg	Höchstgeschwindigkeit	6 km/h
Breite (gefaltet)	600 mm	Batterie	30 Ah, Lithium
Länge (gefaltet)	800 mm	Elektronik	VSI (Curtiss & Wright)
Höhe (gefaltet)	400 mm	Ladegerät	24 V, 5 Amp
Gesamtbreite	600 mm	Motoren	2 x 200 Watt, bürstenlos
Gesamtlänge	min. 855 mm, max. 1090 mm	Steigfähigkeit max.	8° (dynamische Stabilität)
Gesamthöhe	min. 905 mm, max. 1005 mm	Kantensteigfähigkeit max.	50 mm
Rückenhöhe	450 oder 550 mm	Räder	Antriebsräder 12" Vollgummi / Lenkräder 8" Vollgummi
Sitzbreite	430 mm (Kissenbreite)	Farbakzente	3: Rot, Grün, Blau
Sitztiefe	450 mm (Kissentiefe)	Gewicht Rollstuhl	37,5 kg (inkl. Batterie)
Sitzhöhe	500 mm (ohne Kissen)	Gewicht Batterie	5,5 kg
Armlehnenhöhe	270 mm (ab Sitzplatte)	Gewicht ohne Batterie	32 kg
Reichweite max.	50 km*	Garantie	5 Jahre auf den Rahmen

*Die Reichweite wurde nach ISO 7176 (Absatz 4) für den theoretischen Energieverbrauch von Rollstühlen berechnet.



Sunrise Medical AG
Erlenauweg 17
3110 Münsingen
Fon: 031 958 3838
info@sunrisemedical.ch
www.SunriseMedical.ch

Für weitere Informationen beachten Sie bitte unsere Bestellformulare oder kontaktieren Sie unseren Kundendienst.

Technische Änderungen, Anpassungen und Druckfehler vorbehalten.