

A black and white photograph of a man in a wheelchair, wearing a tank top and shorts, holding a basketball high above his head with his right hand. The background is dark, and the lighting highlights the man's physique and the wheelchair. The overall mood is one of strength and determination.

QUICKIE
Live without limits.

ALL COURT

ALL COURT

Entwickelt mit Unterstützung eines Elite Basketball Teams, setzt der Quickie All Court® Basketball-Rollstuhl neue Maßstäbe in Sachen Performance und Design.

Dank dem patentierten Schwerpunkt-Anpass-System, kann der All Court® ganz nach individuellen Schwerpunkt- und Sitzwinkelanforderungen auf den jeweiligen Nutzer eingestellt werden – ohne dabei auch nur ein einziges Teil auszuwechseln.

Diese Funktionen – zusammen mit einer Fülle von Optionen – machen aus dem Quickie All Court® den idealen Rollstuhl für Freizeit- und Elite-Sportler.



ALL COURT
Aluminium

Auch als Titanium Version erhältlich



Die Anordnung der Lenkräder stellt sicher, dass Tempo und Wendigkeit nicht bereits durch die Räder absorbiert werden.


Extreme Radsturzmöglichkeiten von 16° oder 20° garantieren hohe Stabilität bei hervorragender Wendigkeit.

Der Quickie All Court® ist mit einem oder zwei integrierten Antikippprüdern erhältlich. Die Antikippprüder erlauben es dem Spieler, sein Gewicht direkt über die Hinterräder des Rollstuhls zu verlagern, was zu wesentlichen Vorteilen in Bezug auf Agilität, Drehfreudigkeit und Kraft führt.

Die Abstützung des einzelnen Antikipprades ist eine wichtige Option auf dem Quickie All Court®. Diese anpassbare Abstützung, welche an der Querverstrebung des Rahmens und am integrierten Antikipprad befestigt wird, stabilisiert beim Zurücklehnen des Spielers den Rückwärts-Flex des Sitzrahmens.

Das Design des Beckengurtes mit Ratschensystem wurde durch unsere Teamathleten inspiriert. Der Gurt verfügt über zwei Ratschenverschlüsse ähnlich denen einer Snowboardbindung. Dieses System erlaubt die bestmögliche Verbindung zwischen Spieler und Rollstuhl. Je enger die Verbindung zwischen Rollstuhl und Athlet, umso direkter wirken sich Bewegungen auf die Reaktion des Rollstuhls aus.

Unser patentiertes Schwerpunkt-Anpass-System ermöglicht eine maximale horizontale Anpassung (Körperschwerpunkt über der Achse) von 9 cm und eine vertikale Sitzwinkelanpassung von bis zu 13 cm. Diese Kombination erlaubt es dem Spieler sein Gewicht über dem Antriebsrad zu positionieren und damit Schwerpunkt und Sitzwinkel individuell zu optimieren. Weitere Änderungen, wie ein Positionieren der Radhalteplatte oder Winkelanpassung der Vorderradgabel, sind nicht nötig.

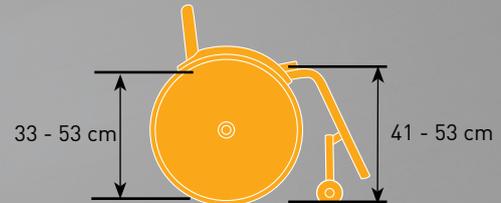

ALL COURT

ALL COURT TI

GEWICHT	ab 10.88 kg	ab 9.75 kg
MAX. BENUTZERGEWICHT	113 kg	113 kg
LENKRAD	3" Micro	3" Micro
ANTRIEBSRAD	Gekreuzt gespeichte oder Spinergy Sporträder: 24" - 26"	Gekreuzt gespeichte oder Spinergy Sporträder: 24" - 26"
STECKACHSEN	Edelstahl, optional Steckachse Titanium oder mit Tetraantriegelung	Edelstahl, optional Steckachse Titanium oder mit Tetraantriegelung
ACHS-/RADSTURZ	16° oder 20°	16° oder 20°

Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte den entsprechenden Bestellformularen.
Technische Änderungen, Preisadjustungen und Druckfehler vorbehalten.