

improving people's lives

 XFamily²



 SUNRISE
MEDICAL.

Standards Légers	Confort & Positionnement	Multifonction
RubiX² BasiX²  Breezy BasiX²  Breezy RubiX²  Breezy RubiX² XL	RubiX² Comfort  Breezy RubiX² Comfort  Breezy RubiX² Comfort XL	RelaX²  Breezy RelaX²
Prix		
		Configuration

Breezy XFamily²

Points d'améliorations :

1. Qualité
2. Fonctionnalités
3. Look/Perception

Qualité



BasiX² RubiX² RelaX²



Nouveau Repose-jambe (meilleure qualité visuelle, plus moderne, pin horizontal et articulation aluminium , moins de jeu et de flexibilité)



Nouveau support de fourche (rigidité accrue, écrous 8mm contre 6 mm)



Crash testés

125 kg

125/170 kg

145/170 kg

Qualité



BasiX²



RubiX²



RelaX²

Nouveau frein avec patin de frein plus résistant et capuchon souple (même patin de frein et capuchon utilisés sur le RelaX²)



Croisillon enfilé pour optimiser la rigidité

Look/Perception

BasiX²

RubiX²

RelaX²



Nouveau design de potence – moins de composite



Nouvelle manchette : + large,
+ longue + confortable



Freins plus modernes

Look/Perception

BasiX² RubiX² RelaX²



Accoudoirs : tubes noirs
nouveau coloris de châssis : argent brillant



Nouvelle matière toile de dossier + qualitative



Croisillon enfilé : + léger visuellement

Look/Perception

BasiX²

RubiX²

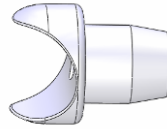
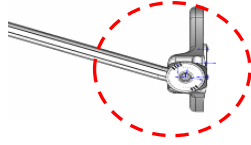
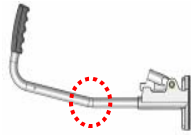
RelaX²



Nouveau support de fourche tout en rondeur

Pièces rajoutées en aluminium noir mat

Fonctionnalités



BasiX²

RubiX²

RelaX²



Courbure lombaire plus confortable (13°)



Tube d'extension courbé en son extrémité : meilleure angulation de la palette vers l'avant



Repose-jambes (molette plus ergonomique, meilleure résistance)



Manipulation de la potence plus simple (pivot plus court)

Fonctionnalités

BasiX²



RubiX²



RelaX²



Capuchon levier arrière de basculement

Accoudoir Vis de réglage supplémentaire



Retrait du support lombaire

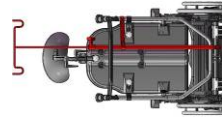


Fonctionnalités

BasiX²

RubiX²

RelaX²



Châssis ouvert (idem RubiX) avec réglages améliorés : COG et profondeur d' assise



Tige porte
sérum



Tablette escamotable



Tablette fixation améliorée

Compatibilités de pièces entre modèles

	Basix	RubiX	Relax [®]			
croissillon Basix	•	•				
bielles	•	•				
toile de dossier (3 sangles)	•	•				
toile de dossier (4 sangles)	•	•				
poignées de poussée rég.hauteur	•	•				
hand grips	•	•	•			
dossier réglable en angle	•	•				
dossier inclinable	•	•				
ceinture	•	•				
potence	•	•	•			
palette & tubes extension	•	•	•			
Repose-jambes	•	•	•			
coussinet amputé	•	•	•			
goutière hémiplégique	•	•	•			
freins	•	•				
rallonge de frein	•	•				
accoudoirs réglables en hauteur	•	•				
manchette	•	•				
roues avant	•	•	•			
fourche	•	•	•			
roues arrière	•	•	•			
rouleto de sécurité	•	•	•			
porte canne	•	•				
flasques	•	•	•			
levier de basculement	•	•				

Autres nouveautés

Jay Comfort Line siège et dossier



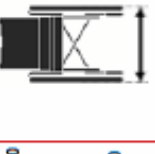
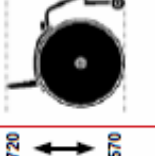
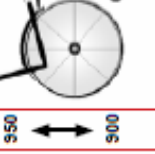
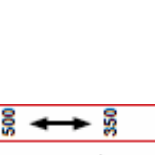
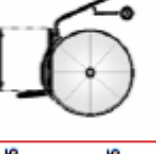
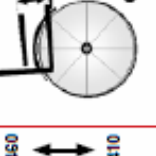
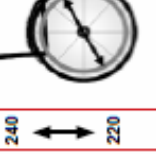
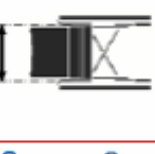
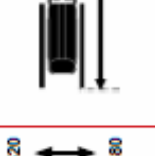
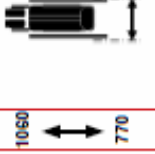
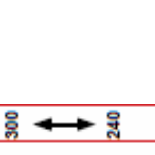
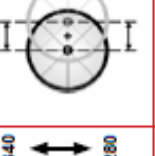
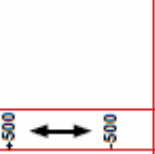
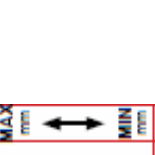
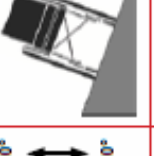
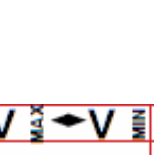
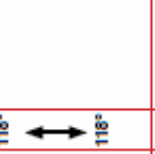
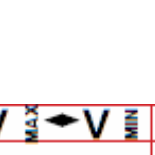
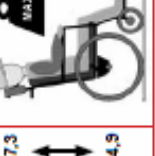
- Roues avant 6" sur le BasiX² et RubiX²

Données Techniques et comparaisons ancienne et nouvelle génération

BasiX (ancien)



Breezy BasiX	Breezy BasiX ²
Gris argent martelé	Argent brillant (visuellement meilleure qualité)
Support de fourche rond, boulons 6 mm	Support de fourche ovale, boulons 8 mm (plus moderne; rigidité accrue)
Manchette petite et dure	Manchette large et souple (perception + qualitative, meilleur confort)
Pivot composite long	Pivot composite plus court (meilleure manipulation et simplicité à l'usage)
Frein avec fixation métal	Nouveau frein (Xfamily) (capuchon souple, plus moderne)
Profondeur d'assise 41 – 43,5	Profondeur d'assise 41 – 46 (meilleure fonctionnalité)
Hauteur de dossier 41- 43,5 cm	Hauteur de dossier 41 – 46 cm (meilleure fonctionnalité)
Centre de Gravité +/- 3,5 cm	Centre de Gravité +/- 5 cm (meilleure fonctionnalité)
Fixation croisillon en U	Croisillon enfilé (meilleure perception)
Angle de la palette limité	Meilleure angulation antérieure (confort accru)
Courbure lombaire 8°	Courbure lombaire 13° (confort accru)
Toile très fine	Toile de meilleure qualité (meilleure perception)

					
1100 ↕ 770	720 ↕ 570	950 ↕ 900	500 ↕ 350		
					
505 ↕ 425	460 ↕ 380	1060 ↕ 770	530 ↕ 490		
					
460 ↕ 410	340 ↕ 280	+500 ↕ -500	300 ↕ 240		
					
850 ↕ 800	10° ↕ 10°	10° ↕ 10°	MAX ↕ MIN		
					
10° ↕ 10°	80° ↕ 74°	118° ↕ 118°	V ↕ MIN		
					
0° ↕ 0°	17,3 ↕ 14,9	125 ↕ ---	V ↕ MIN		
					
8,4 ↕ 8,4	8,4 ↕ 8,4	125 ↕ ---	MAX ↕ MIN		
					
8,4 ↕ 8,4	17,3 ↕ 14,9	125 ↕ ---	MAX ↕ MIN		

Breezy BasiX² - Hauteurs d'assise

425 mm	8"	1A	
450 mm	8"	2A	1B
480 mm	8"	3A	2B
505 mm	8"		3B
425 mm	6"	2A	1B
450 mm	6"	3A	2B
480 mm	6"		3B

400 mm	24"	1	
425 mm	24"	2	
450 mm	24"	3	12"
475 mm	24"	4	
500 mm	24"	5	

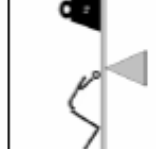
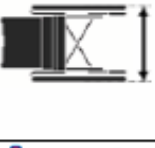
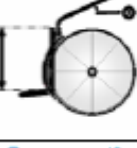
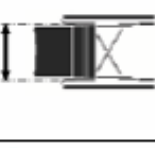
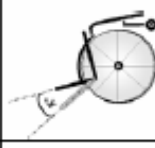
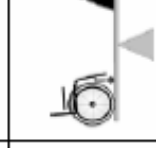
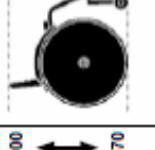
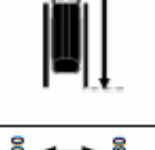
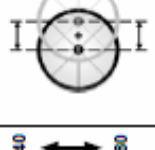
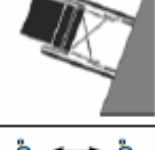
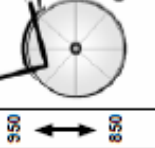
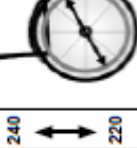
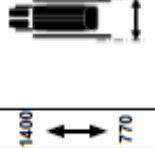
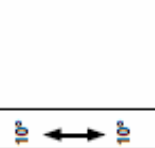
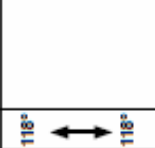
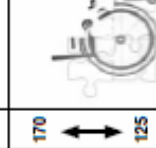
RubiX (ancien)



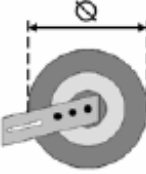
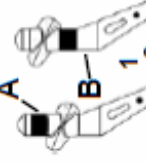
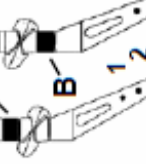
RubiX² (nouveau)

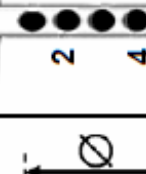


Breezy RubiX	Breezy RubiX ²
Gris argent martelé	Argent brillant (visuellement meilleure qualité)
Support de fourche rond, boulons 6 mm	Support de fourche ovale, boulons 8 mm (plus moderne; rigidité accrue)
Pivot de potence assez long	Pivot plus court (manipulation plus aisée)
Frein avec fixation métal	Nouveau frein (Xfamily) (capuchon souple, look plus moderne)
Fixation croisillon en U	Croisillon enfilé (meilleure perception)
Angle de la palette limité	Tube extension courbé : meilleure angulation antérieure (confort accru)
Courbure lombaire 8°	Courbure lombaire 13° (confort accru)
Toile très fine	Toile de meilleure qualité (meilleure perception)

						
1400 ↕ 770	530 ↕ 375	460 ↕ 410	850 ↕ 800	10° ↕ 10°	0° ↕ 0°	8,4 ↕ 8,4
						
800 ↕ 570	510 ↕ 410	600 ↕ 380	340 ↕ 280	10° ↕ 10°	80° ↕ 74°	17,3 ↕ 14,9
						
950 ↕ 850	240 ↕ 220	1400 ↕ 770	~500 ↕ ~500	10° ↕ 10°	118° ↕ 118°	170 ↕ 125
						
500 ↕ 350	530 ↕ 490	300 ↕ 240	MAX ↕ MIN	V ↕ V	V ↕ V	2.0 ↕ I

Breezy RubiX² - Hauteurs d'assise

				
375mm	6"	1A		
400mm	6"	2A	1B	
425mm	6"		2B	1A
450mm	6"			2A
480mm	6"			3A
				2B
				3B
415mm	7"	2A		1A
440mm	7"		2B	2A
465mm	7"			3A
490mm	7"			2B
				3B
425mm	8"	2A		1A
450mm	8"		2B	2A
480mm	8"			3A
505mm	8"			2B
530mm	8"			3B
				3C

		
375mm	24"	
400mm	24"	1
425mm	24"	2
450mm	24"	3
475mm	24"	4
500mm	24"	5
525mm	24"	
375mm	22"	1
400mm	22"	2
425mm	22"	3
450mm	22"	4
475mm	22"	5
500mm	22"	
525mm	22"	
450mm	12"	

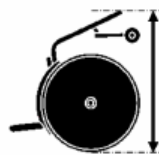
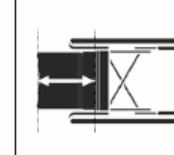
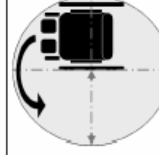
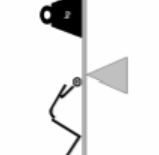
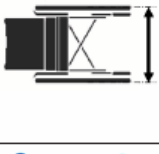
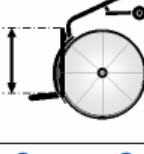
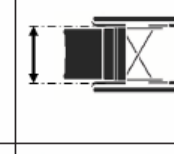
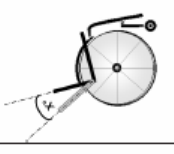
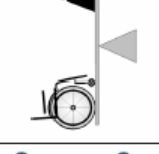
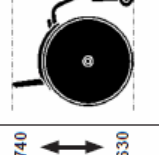
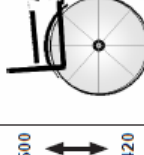
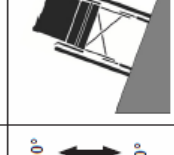
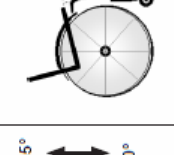
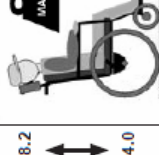
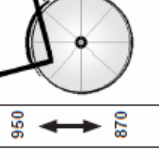
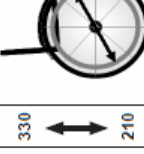
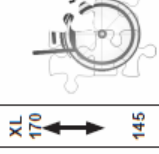
Breezy BasiX² vs RubiX²



Breezy BasiX²	BREEZY RubiX²
Profondeur 41 – 46 cm (pré-réglé 43,5cm)	Profondeur 41 – 51 cm (configurable)
Hauteur d'assise 42,5 à 51 cm (pré-réglé 48cm)	Hauteur d'assise 37,5 à 53 cm (configurable)
Toile de dossier avec 3 sangles (semi-réglable)	Toile de dossier 4 sangles avec coussin de dossier (réglable)
1 coloris	3 coloris
Manchette fixe (réglage en profondeur par palier)	Manchette 'coulissante' (réglage en profondeur continu)
Poids Utilisateur 125 kg	Poids Utilisateur 125 / 170 kg
Gamme d'options limitées	Large gamme d'options, incluant Jay
Produit stock avec spécificités pré-définies	Produit sur mesure
Fauteuil standard léger réglable pour Utilisateurs passifs/ semi actifs	Fauteuil standard léger, multi réglable et configurable pour Utilisateurs semi-actifs



Breezy RelaxX² - Données Techniques

						
1110 ↕ 990	580 ↕ 480	600 ↕ 525	900 ↕ 860	10° ↕ 0°	25° ↕ 0°	18.0 ↕ 18.0
						
740 ↕ 630	500 ↕ 420	530 ↕ 370	420 ↕ 320	10° ↕ 0°	35° ↕ 0°	38.2 ↕ 34.0
						
950 ↕ 870	330 ↕ 210			10° ↕ 0°	180° ↕ 90°	XL 170 ↕ 145
						
560 ↕ 390	535 ↕ 485					4.0 ↕ ...
			MAX mm ↕ MIN mm	V MAX ↕ MIN	V MAX ↕ MIN	

RelaX² (ancien)

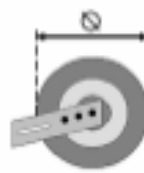
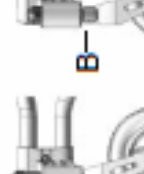


RelaX² (nouveau)



Breezy RelaxX²	
Ancien style repose-jambes	Nouveau repose-jambes (amélioration de la rigidité, réduction du jeu, look plus moderne, déverouillage plus simple)
Coussin de dossier avec support lombaire	Suppression du support lombaire (meilleur confort, plus de maintien latéral)
Cadre d'assise argent	Cadre d'assise noir
appuis-mollets étroits et sans maintien	Appuis-mollets larges et confortables en dartex (confort amélioré, perception : meilleure qualité)
Réglage en avant de la palette limité	Meilleur angulation antérieure (confort accru)

Breezy RelaxX² - Hauteurs d'assise

						
450mm	8"	1		A	B	1
475mm	8"		2	A		2
500mm	8"		2		B	3
415mm	6"	1			B	1
450mm	6"		2	A		2
475mm	6"		2		B	3
450mm	8"	1			B	4