



HELIUM

HIGH-PERFORMER





HELIUM

PERFORMANCES ABSOLUES

La nouvelle génération Helium séduit par ses nouvelles options et ses technologies innovantes – et naturellement par son comportement de conduite...

Ce fauteuil roulant stable et robuste réagit de manière directe, rapide et légère à la moindre impulsion. Grâce à son maniement facile et ses nombreuses possibilités de réglage, le Helium est le compagnon idéal pour vos activités quotidiennes.

Peu importe où vous vous trouvez, ce que vous souhaitez faire ou bien où vous désirez aller – vous pouvez compter sur votre Sopur Helium.



// ULTRA LEGER - MAIS ROBUSTE ET AVEC UNE RIGIDITE EPROUEE DU CHÂSSIS

Grâce à l'utilisation de matériaux de pointe et à des procédés de fabrication innovants, le Helium ne pèse que 6.8 kg et supporte un poids maximum d'utilisateur de 125 kg.

// ANGLE DU CHÂSSIS: 88°

Encore plus compact et doté d'un look encore plus actif – pour les utilisateurs préférant un angle d'assise plus aigu.

// TECHNOLOGIE POUR UNE CONCEPTION ULTRALEGERE

L'utilisation de procédé de fabrication de pointe en aluminium (par ex. hydroformage) permet d'obtenir un design unique et un comportement de conduite exceptionnel.

// PALETTE EPUREE EN CARBONE

L'élégante palette ultralégère en carbone est inclinable et réglable en profondeur – pour un positionnement plus serré des pieds.



❶ RETRECISSEMENT PERFORMANT

Châssis au design ouvert et actif avec rétrécissement du châssis jusqu'à 3 cm à l'avant – pour un meilleur positionnement des jambes.

❷ CROISILLON OVALE AVEC POIGNEE EN CAOUTCHOUC

Grâce à son croisillon ovale ergonomique, le Helium peut être soulevé et transporté facilement et en toute sécurité.

❸ ESSIEU ROUE ARRIERE EN CARBONE

L'axe de la roue arrière est fabriqué en carbone, ce qui le rend extrêmement rigide et permet de réduire le poids. Laissez-vous séduire par l'amélioration des performances et le look unique de cette option.



CONÇU POUR VOUS DEPLACER

Le design ultramoderne épuré du Helium reste discret afin de vous laisser le devant de la scène. Votre fauteuil est un élément important de votre quotidien et devrait à ce titre être personnalisé – pour répondre à vos besoins et refléter votre style de vie.



// DOSSIER FREESTYLE ULTRAMODERNE

Cette option innovante vous offre une bien meilleure liberté de mouvement au niveau du dos/buste.

Le design incomparable de votre dossier Freestyle fait de votre Helium un vrai original. Que vous choisissiez une coque légère en carbone ou une coque colorée en alu, coordonnez-la au coloris du châssis de votre fauteuil roulant. Ces deux versions de dossier améliorent la stabilité de votre buste et vous maintiennent efficacement dans votre vie active.


// PERSONNALISATION ABSOLUE

Difficile de faire mieux: complétez votre sélection de coloris par une des trois couleurs anodisées pour les roues ultralégères 24".



// PERSONNALISATION AVEC IMPRESSIONS GRAPHIQUES

Personnalisez votre Helium à votre gré en choisissant parmi les impressions graphiques pour châssis (inspirées de la tendance des bikes actuels).

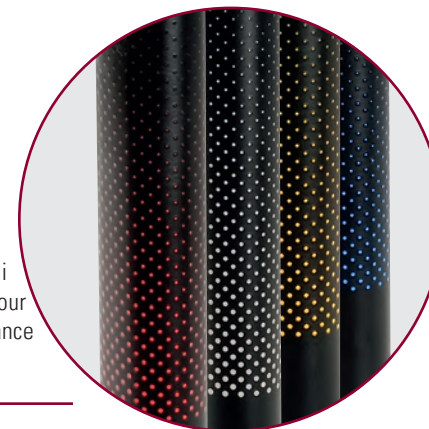

// VOTRE HELIUM, VOTRE COULEUR PREFEREE

Choisissez la couleur du Helium parmi une sélection de 32 coloris.



// CREEZ VOTRE PROPRE LOOK

Mettez une touche de couleur personnelle – également sur la fourche avant, les jantes, le nom du modèle, la plaque du dossier & la fixation.





UN ETAT D'ESPRIT DEUX CONCEPTS



HELIUM

// L'HELIUM ADAPTABLE

Le nouvel Helium séduit par son design ultramoderne mais également par ses nombreuses possibilités d'adaptation. Les différentes possibilités de réglage du centre de gravité permettent de passer d'une conduite très passive à extrêmement souple. Ajustez l'inclinaison du dossier et la hauteur de l'assise de ± 1 cm – le Helium a été spécifiquement conçu pour s'adapter à vos besoins.



HELIUM PRO

// HELIUM PRO ABSOLU

Helium Pro – les avantages du Helium nouvelle génération combinés à un châssis fixe soudé. Le support d'axe soudé assure une rigidité optimale et d'excellentes performances.

Pour un design encore plus épuré, le support du dossier peut également être soudé de manière fixe.

OPTIONS ET CARACTÉRISTIQUES DU NOUVEAU HELIUM

Configurez votre Helium selon vos exigences personnelles. Choisissez parmi un large choix d'options. Jetez un oeil sur le bon de commande du Helium.



// POIGNÉES POUR DOSSIER FREESTYLE

Ces poignées de poussée disponibles en option pour le dossier Freestyle sont amovibles et de ce fait toujours à portée de main lorsqu'on en a besoin.



// BARRE DE DOSSIER OVALE

Equipée d'une poignée ergonomique pour soulever et transporter le fauteuil roulant. Les sangles du dossier existent en 5 coloris différents.



// PROTÈGE-VÊTEMENTS EN CARBONE

Protège-vêtements individuel et léger au design unique.



// FOURCHE MONOBRAS

Conception moderne et stable pour une allure élégante et séduisante.



// PALETTE EN CARBONE

Palette légère et moderne avec angle et profondeur réglables.



// TOILE DE SIÈGE À POIDS LÉGER (CLIP- STYLE)

Solution ultra-légère pour une assise ajustable. Toutes les sangles sont réglables en tension.



// VERROUILLAGE DU DOSSIER


Cette option du dossier permet de maintenir le dossier en position pliée. Cette option est particulièrement utile pour le transport/chargement du fauteuil roulant.



// MAINS COURANTES SURGE® LT

Traction maximale grâce à un meilleur grip!

DONNÉES TECHNIQUES

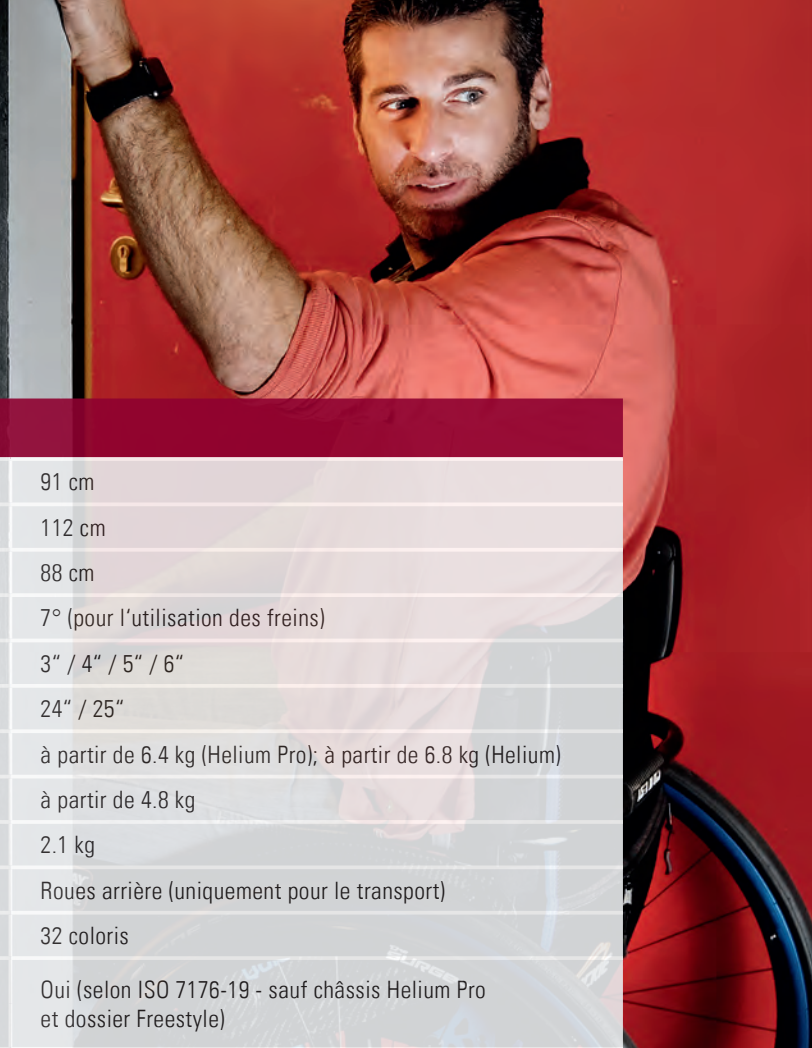

HELIUM // Fauteuil roulant à châssis fixe

Poids max. de l'utilisateur	125 kg (100 kg pour roues Proton, sangle d'assise clip style & dossier poids léger avec barre de dossier ovale)	Longueur hors-tout	91 cm
Versions du châssis	Version adaptable (Helium) & version soudée (Helium Pro)	Hauteur hors-tout	112 cm
Rétrécissement	0 cm, 1 cm & 3 cm (par côté)	Larg. minim. pour 1/2 tour	88 cm
Angle du châssis	100° / 92° / 88°	Stabilité dynamique max.	7° (pour l'utilisation des freins)
Largeur du siège	32 - 46 cm (en paliers de 2 cm)	Roues avant	3" / 4" / 5" / 6"
Profondeur du siège	34 - 48 cm (en paliers de 2 cm)	Roues arrière	24" / 25"
Hauteur de l'assise avant	43 - 57 cm (en paliers de 1 cm)	Poids total	à partir de 6.4 kg (Helium Pro); à partir de 6.8 kg (Helium)
Hauteur de l'assise arrière	37 - 50 cm (en paliers de 1 cm)	Poids de transport	à partir de 4.8 kg
Hauteur du dossier	25 - 45 cm (en palier de 2.5 cm)	Poids pièce plus lourd	2.1 kg
Angle du dossier	-31° à +15° (en paliers de 3.5°)	Pièce détachée	Roues arrière (uniquement pour le transport)
Centre de gravité	Domaine de réglage de 2.0 à 10.4 cm (Helium)	Coloris	32 coloris
Carrossage	0°, 3°, 6° et 9°	Crash Test	Oui (selon ISO 7176-19 - sauf châssis Helium Pro et dossier Freestyle)

Pour de plus amples informations, prière de consulter notre bon de commande ou de contacter notre service client.

Sous réserve de modifications techniques, d'adaptations et de fautes d'impression.



Sunrise Medical SA

Erlenauweg 17
CH-3110 Münsingen
Fon: 031 958 3838
Fax: 031 958 3848
info@sunrisemedical.ch
www.SunriseMedical.ch

