

zippie®

LE ZIPPIE IRIS – POUR  
UN SOIN OPTIMAL  
DES ENFANTS !

Les fauteuils roulants pour enfants  
Zippie IRIS® offrent une combinaison  
parfaite entre positionnement,  
maniabilité et facilité de transport.  
Grâce à l'option traverse pliable  
XLOCK®.



## Rotation intelligente

CONÇUE SPÉCIALEMENT POUR LES BESOINS DES ENFANTS

La technologie de rotation intelligente du cadre d'assise brevetée par IRIS permet un équilibre idéal entre positionnement individuel de l'assise et centre de gravité. Les proportions du fauteuil roulant ont été adaptées aux besoins des enfants. Grâce au mouvement doux de basculement, l'enfant se sent à l'aise et en sécurité. La bascule régulière et contrôlée de l'assise en est facilitée.

## Transit attesté

VOYAGER EN TOUTE SÉCURITÉ

Le Zippie IRIS est reconnu pour la sûreté de son utilisation en voyage, que ce soit en systèmes de transport ou en voiture. Équipé selon les prescriptions légales d'une ceinture de fixation agréée pour fauteuil roulant et d'un système de retenue des occupants, il peut aussi être utilisé comme siège passager avant.

En option

## Cadre pliable XLOCK®

POUR UN TRANSPORT SIMPLIFIÉ

Le Zippie IRIS se plie et se range facilement pour le transport. Grâce au système breveté XLOCK®, l'IRIS fait preuve d'une grande stabilité quand il est déplié.

Zippie IRIS – disponible  
avec CADRE FIXE ou  
PLIABLE !



XLOCK  
traverse  
repliable



Évolutif grâce  
à des éléments  
adaptables et  
échangeables.

## Évolutif

L'IRIS grandit avec l'enfant. Le cadre XLOCK permet une adaptation de 10 cm de la profondeur d'assise et de 5 cm de la largeur d'assise.

En option, disponible avec set d'extension du cadre.

Les éléments adaptables, y compris les accoudoirs et les palettes, sont d'une grande aide pour garder une bonne position tout au long de la croissance.


LES ENFANTS VEULENT BOUGER,  
SE DÉVELOPPER & GRANDIR !  
LE ZIPPIE IRIS GRANDIT AVEC EUX !

## Positionnement parfait DE LA TÊTE AUX PIEDS

### Plage d'inclinaison et de basculement à 40° et à 55°

L'IRIS est disponible avec une plage d'inclinaison et de basculement à 40° ou à 55°. Il est le seul fauteuil basculant pédiatrique offrant un tel degré d'inclinaison.

La bascule d'assise et l'inclinaison de dossier facilitent l'alimentation et la respiration de l'enfant, réduisent les zones de pression et favorisent le contact visuel avec l'enfant.

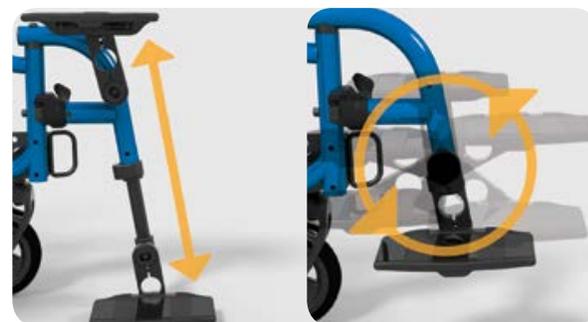

## Accessoires de confort pour l'accompagnateur



- Le puits de ventilation vertical facilite l'accès aux appareils respiratoires montés sur le fauteuil.
- Le mécanisme de bascule activé par une pédale élimine les câbles qui traînent (image de gauche).
- Verrouillage compact par bouton poussoir monté sur le tube du dossier. Utilisation simplifiée.
- L'angle de la poignée réglable à 260° facilite le réglage de la hauteur, s'adapte à la taille de
- l'accompagnateur et permet de pousser le fauteuil même en position de bascule (image de gauche).
- La gaine du levier de bascule évite les dépôts qui pourraient s'accumuler sur le hardware.

REMARQUE IMPORTANTE : les couleurs représentées peuvent être légèrement différentes des couleurs réelles.



## 27 coloris

Aucun fauteuil roulant pour enfant ne propose autant de couleurs que le Zippie IRIS !

Choisis parmi les 27 coloris et motifs.

## Fauteuil sur mesure

Notre équipe de B4M (construction spéciale) met au point des fauteuils sur mesure qui dépassent de beaucoup les standards.

Nos spécialistes des services construction, achat et production réalisent pour vous un fauteuil roulant sur mesure selon vos exigences.

### Option Transit

Support de fixation pour le transport

### Plage d'inclinaison du siège basculant

**40°:** de -5 à 35°, de 0 à 40°, de +5 à 45°

**55°:** de -5 à 50°, de 0 à 55°, de +5 à 60°

### Poids du fauteuil roulant

cadre fixe : 14.5 kg

cadre pliable : 16.2 kg

### Poids de transport

(sans palettes ni roues arrière)

cadre fixe : 10.3 kg

cadre pliable : 12.0 kg

### Poids de l'utilisateur

68 kg max.

### Largeur totale

de 44.5 cm à 63.5 cm

### Largeur d'assise

cadre fixe :

de 25.5 cm à 45.75 cm

cadre pliable :

de 25.5 cm à 40.60 cm

(évolutif jusqu'à 45.75 cm)

### Profondeur d'assise

de 25.5 cm à 45.75 cm

### Hauteur d'assise avant

de 33 cm à 48.3 cm

avec plaque d'assise :

de 28 cm à 44.5 cm

### Hauteur d'assise arrière

de 33 cm à 48.3 cm

avec plaque d'assise :

de 28 cm à 44.5 cm

Si vous désirez des informations supplémentaires, consultez le bon de commande ou contactez notre service clientèle.

Sous réserve de modifications techniques et de fautes d'impression.

### Repose pieds

amovibles et pivotants vers l'extérieur et l'intérieur : 60°, 70°, 80°, 90°.

Repose pieds renforcés, repose pieds relevables séparément. De plus, un large choix de palettes partiellement réglables en angle.

### Angle d'inclinaison du dossier

de (-) 5° à (+) 30°

### Versions de dossier

hauteur fixe, hauteur réglable, dossier Reclining

### Hauteur de dossier

hauteur fixe : 48 cm, 56 cm, 63 cm

hauteur réglable :

de 40.75 cm à 56 cm,

de 48.25 cm à 63.5 cm

dossier Reclining : 53 cm, 61 cm

### Centre de gravité

réglable : 15.2 cm

### Taille des roues arrière

12", 16", 20", 22", 24"

### Taille des roues directrices

4", 5", 6", 8", 8x2"

### Évolutif

Oui

### Garantie

Cadre 2 ans

Accessoires et options 1 an