

Tango®



Tango®



Le nouveau fauteuil roulant électronique standard! Conçu pour l'intérieur et le plein air

Échanger les composants et effectuer des adaptations en un tour de main.
Un maniement simplifié sans renoncer à une qualité éprouvée.

Un modèle moyen de gamme, simple et robuste, pour débutant
Rapidement et facilement adaptable et donc diversement utilisable
Moins de service, faibles frais d'entretien = rentabilité élevée



Le Quickie Tango représente un plus en matière de sécurité durant le transport grâce au crash test ISO 7176-19. Il est autorisé pour le transport de personne assise dans leur fauteuil roulant, ce qui est important pour les services de transport (visite chez le médecin par ex.) , car le patient ne doit pas impérativement être transféré dans un siège d'auto.



Tango[®]

Le nouveau fauteuil roulant électronique standard!

Grâce à sa multiplicité de fonctions standard, à ses options performantes, à son maniement simple et à sa rentabilité, le nouveau Quickie Tango représente le bon choix pour l'intérieur et le plein air.

Une importante configuration en standard

- inclinaison d'assise manuelle
- angle du dossier réglable manuellement
- assise réglable en largeur et en profondeur
- hauteur du dossier adaptable
- toile de dossier réglable par velcro
- angle du dossier orientable
- dossier rabattable pour transport compact
- bonnes performances à l'intérieur, comme en plein air
- mesures compactes:
 - 58 cm avec roues arrières 12"
 - 60 cm avec roues arrières 14"



Grand choix d'options manuelles et électriques

En plus des standards, le Quickie Tango offre une large palette d'options manuelles et électriques. Par exemple, l'adaptation électrique de l'angle du dossier et l'inclinaison électrique de l'assise, afin d'ajuster le Tango aux besoins de l'utilisateur.

Les options manuelles et électriques peuvent également être ajoutées après l'achat avec le set de mise à jour correspondant ou être retirées. Parfaitement adapté à la remise en service!



Repose-pieds manuels

Repose-pieds réglables en hauteur manuellement

Adaptation électrique de l'angle du dossier


Réglage manuel de l'angle du dossier par soutien du vérin à gaz de -3° à 30°
Réglage électrique de l'angle du dossier par commande joystick de -3° à 30°

Inclinaison électrique de l'assise

Inclinaison manuelle de l'assise par actionneur. Réglable de 3° à 25°
Inclinaison électrique de l'assise de 3° à 25° , réglable par commande

Un équipement standard précieux

Le Quickie Tango offre une configuration de base complète. Réglages diversifiés, options adaptables, confort et équipement pour un transport sûr.

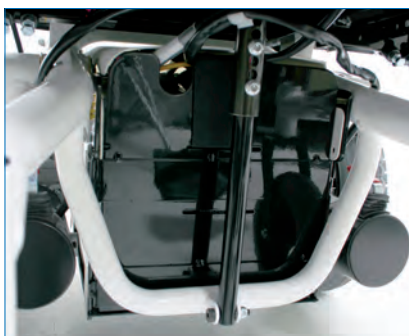

Adaptation manuelle de l'inclinaison d'assise

L'inclinaison de l'assise peut être adaptée manuellement (avec des outils) de 0° à 9°



Adaptation manuelle de l'angle du dossier

L'angle du dossier est adaptable sans outils de -3° à 12° (par palier de 3°)



Hauteur et toile de dossier

La toile de dossier est réglable par velcro et la hauteur du dossier peut être adaptée à 45, 47.5 et 50 cm



Ajustage de la profondeur d'assise

L'unité du dossier peut être adaptée à la profondeur de l'assise de 42.5 à 50 cm (par palier de 2.5 cm)

Ajustage de la largeur d'assise

Largeur d'assise adaptable par les accoudoirs de 40 à 50 cm



Dossier rabattable vers l'avant

Pour un transport compact et peu encombrant

Accoudoirs réglables en hauteur: l'accoudoir standard à fixation simple peut aussi être réglé en hauteur

Repose-pieds ajustables en largeur: les repose-pieds peuvent être déplacés en largeur de 4 cm vers l'extérieur suspensions des roues arrières



Éclairage et clignotants
Éclairage et clignotants en option pour plus de sécurité sur la route!



Garde-boue pour les roues arrières

Garde-boue en option. Protège l'utilisateur et le fauteuil roulant.



Suspensions des roues arrières

Les roues arrières sont équipées de suspensions en standard, afin de garantir le confort de conduite en plein air

Points de fixation

Points de fixation intégrés et faciles à atteindre à l'avant et à l'arrière. Pour un transport sûr en position assise

Service simple


Entretien simple des batteries





Unité de dossier et siège confort

En option, aussi avec siège et dossier confort pour un positionnement optimum et une bonne stabilité d'assise

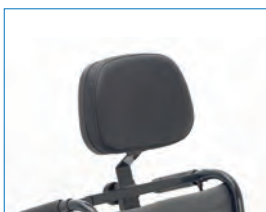

Appui-tête standard

Pour le dossier standard



Appui-tête confort

Pour le dossier confort



Électronique

Électronique simple, mais efficace pour faciliter le maniement de la direction et des options


Électronique programmable VR2 60A

L'unité de contrôle VR2 dirige jusqu'à 2 mécanismes de commande par le joystick

Commande avec affichage LED sans éclairage et clignotant

Commande avec affichage LED avec éclairage et clignotant

Commande rabattable sur le côté

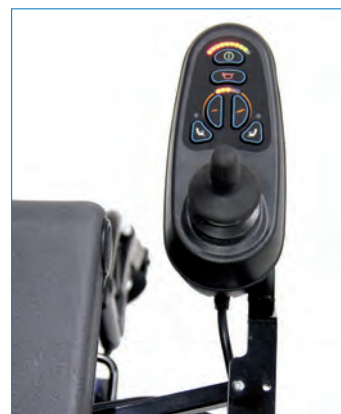

Monte-trottoir - Obstacle max. 10 cm

Autres options

Choix de la couleur du châssis brillant argent, brillant bleu et Brillant rouge

Choix des roues arrières et avant 12" - 8" ou 14" - 9"

Porte-canne


Tango®




Unité du siège - possibilités d'adaptation

Profondeur du siège	42.5, 45, 47.5, 50 cm	Inclinaison électrique du siège	3° à 25°
Largeur du siège	40 à 50 cm	Hauteur du dossier	45 / 47.5 / 50 cm
Hauteur de l'assise	43 cm (avec inclinaison 3°)	Angle du dossier (manuel)	-3° à 12°
Inclinaison manuelle du siège	0°, 3°, 6°, 9°	Accoudoirs	27 à 36 cm


Garde au sol

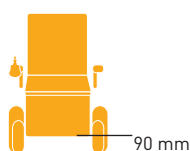

Largeur hors-tout
58 cm avec roues arrières 12"
60 cm avec roues arrières 14"

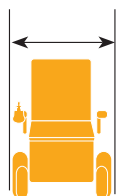


Stabilité dynamique
Pente max.

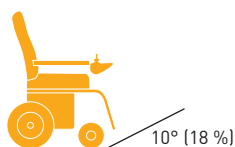

Longueur hors-tout,
repose-pieds
incl. 110 cm



Obstacle max.
(avec monte-trottoir)

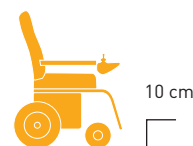

Données techniques (configuration standard)

Vitesse	6 kmh / 10 kmh	Commande	VR2
Autonomie	jusqu'à 25 km (ISO 7176-4)	Poids max. de l'utilisateur	125 kg
Batteries	50 Ah	Poids total, batteries incl.	100 kg
Rayon de braquage	130 cm	Crash test par	ISO 7176-19
		Position tarifaire	501 000

Autres informations concernant la configuration, les options et les accessoires: voir bon de commande

Sous réserve de changements techniques, d'adaptations de prix et d'erreurs d'impression



Sunrise Medical SA

Erlenauweg 17
CH-3110 Münsingen
Fon 031 958 3838
Fax 031 958 3848
info@sunrisemedical.ch
www.SunriseMedical.ch